


ClinCheck® Pro Software Funktionsübersicht

In dieser Übersicht erhalten Sie einen kurzen und einfachen Überblick über die in der ClinCheck® Pro Software verfügbaren Bearbeitungs- und Visualisierungs-Tools.

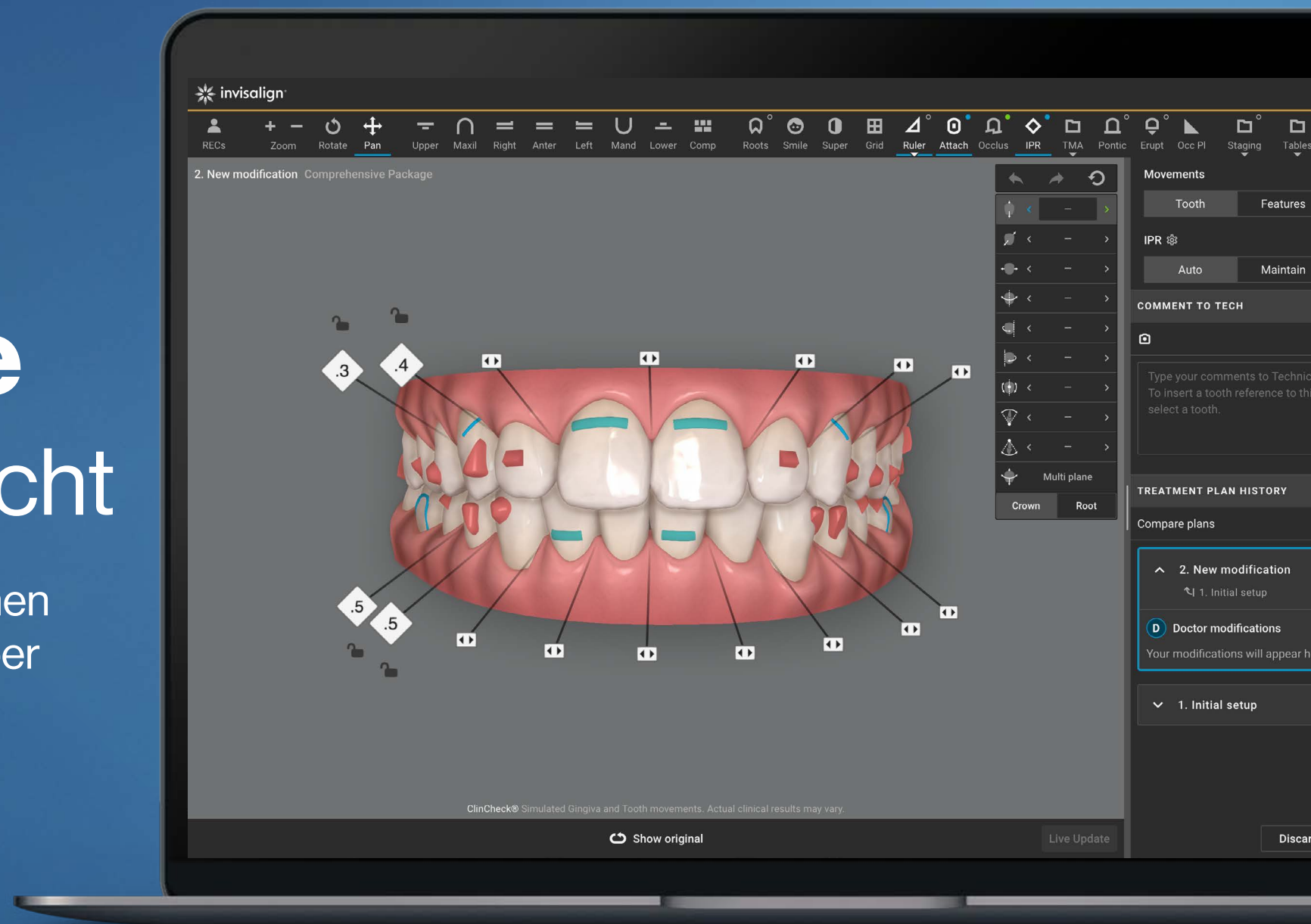

Übersicht über die ClinCheck® Pro Software

Die hochentwickelte ClinCheck® Pro Software bietet Unterstützung bei der Behandlungsplanung und ermöglicht Ihnen eine präzise Kontrolle über die gewünschten Ergebnisse. Sie enthält eine Reihe leistungsstarker Visualisierungs- und Bearbeitungstools, die Ihnen bei der Erstellung Ihrer Behandlungspläne mehr Flexibilität bieten und Zeiteinsparungen ermöglichen.

Anpassungen mit 3D-Steuerung

ClinCheck® Live Update mit 3D-Steuerung

In-Face-Visualisierung

ClinCheck® Smile Video

DVT-Integration

Invisalign Smile Architect™* Software

Der Plan Editor in der ClinCheck® Software*

Zusätzliche Tools



Auf die ClinCheck® Pro Software können Sie **jederzeit und überall** über Ihr **bevorzugtes Gerät** zugreifen.

Anpassungen mit 3D-Steuerung

Mithilfe der **3D-Steuerung** können Sie Änderungen an Ihrem ursprünglichen Behandlungsplan in Echtzeit vornehmen.

Sie können **Ihren Behandlungsplan direkt selbst optimieren**, sodass Sie weniger schriftliche Kommentare für die CAD-Designer hinterlassen müssen.



Mehr Unabhängigkeit

Mit der Möglichkeit, Änderungen am Behandlungsplan in Echtzeit vorzunehmen, haben Sie alles, was Sie für die Erzielung optimaler Ergebnisse benötigen, ohne auf einen CAD-Designer zurückgreifen zu müssen.



Einfache Visualisierung

Mithilfe der 3D-Steuerung können Sie auf einfache Weise Ursache und Wirkung Ihrer Entscheidungen auf den Behandlungsplan erkennen.



Optimierte Behandlungsplanung

Dank der hochpräzisen 3D-Steuerung können Sie mit ClinCheck® Live Update Ihre Behandlungsplanung noch feiner abstimmen.


Zahnposition bearbeiten

Ermöglicht die Änderung der Endposition einzelner Zähne.

Zahnbogenform ändern

Lückenstand und ASR

Umgang mit Attachments und Funktionen

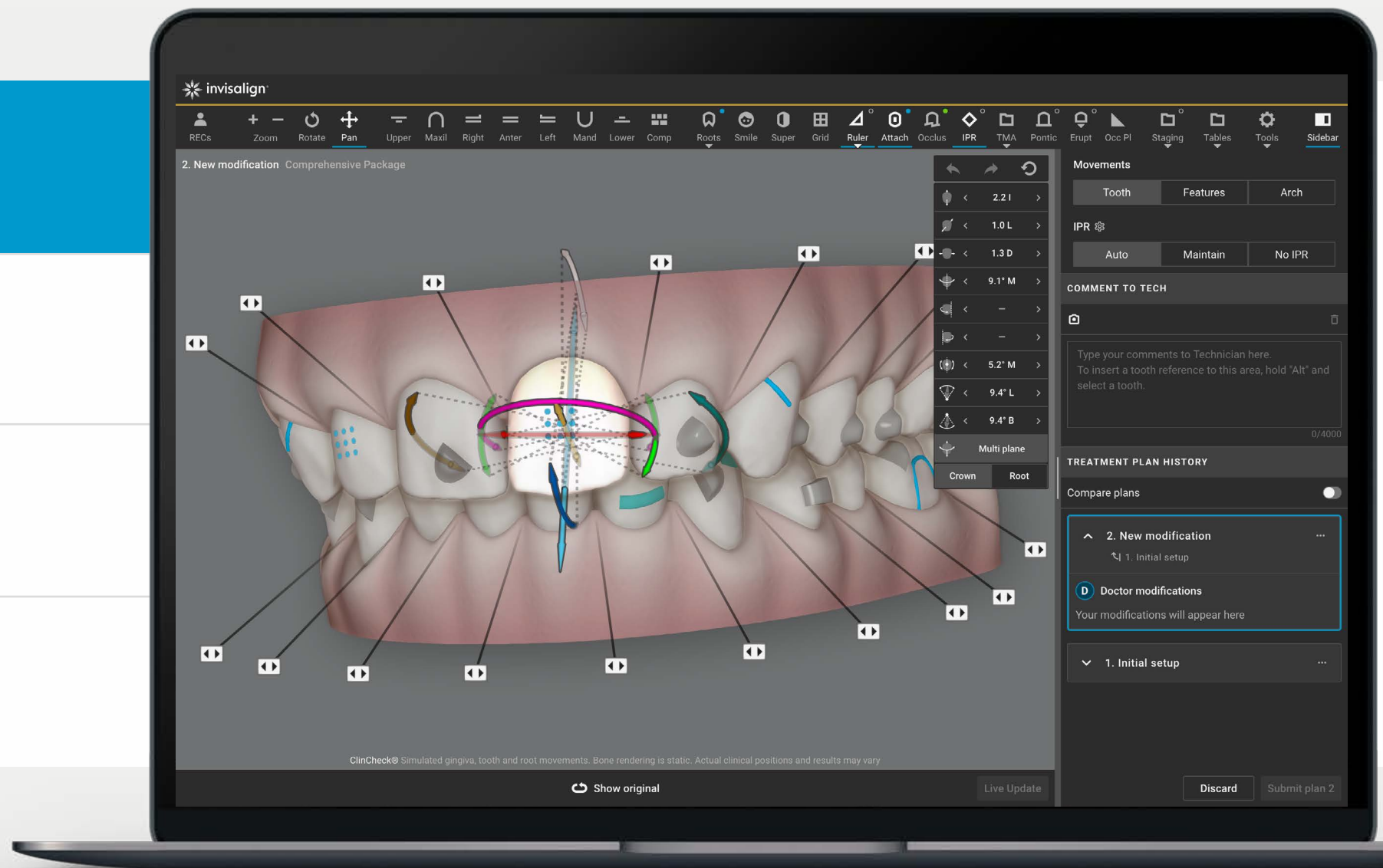

Anpassungen mit 3D-Steuerung

Mithilfe der **3D-Steuerung** können Sie Änderungen an Ihrem ursprünglichen Behandlungsplan in Echtzeit vornehmen.

Sie können **Ihren Behandlungsplan direkt selbst optimieren**, sodass Sie weniger schriftliche Kommentare für die CAD-Designer hinterlassen müssen.



Mehr Unabhängigkeit

Mit der Möglichkeit, Änderungen am Behandlungsplan in Echtzeit vorzunehmen, haben Sie alles, was Sie für die Erzielung optimaler Ergebnisse benötigen, ohne auf einen CAD-Designer zurückgreifen zu müssen.



Einfache Visualisierung

Mithilfe der 3D-Steuerung können Sie auf einfache Weise Ursache und Wirkung Ihrer Entscheidungen auf den Behandlungsplan erkennen.



Optimierte Behandlungsplanung

Dank der hochpräzisen 3D-Steuerung können Sie mit ClinCheck® Live Update Ihre Behandlungsplanung noch feiner abstimmen.


Zahnposition bearbeiten

Zahnbogenform ändern

Seitenzahnexpansion oder -kontraktion in den oberen und/oder unteren Zahnbögen.

Lückenstand und ASR

Umgang mit Attachments und Funktionen

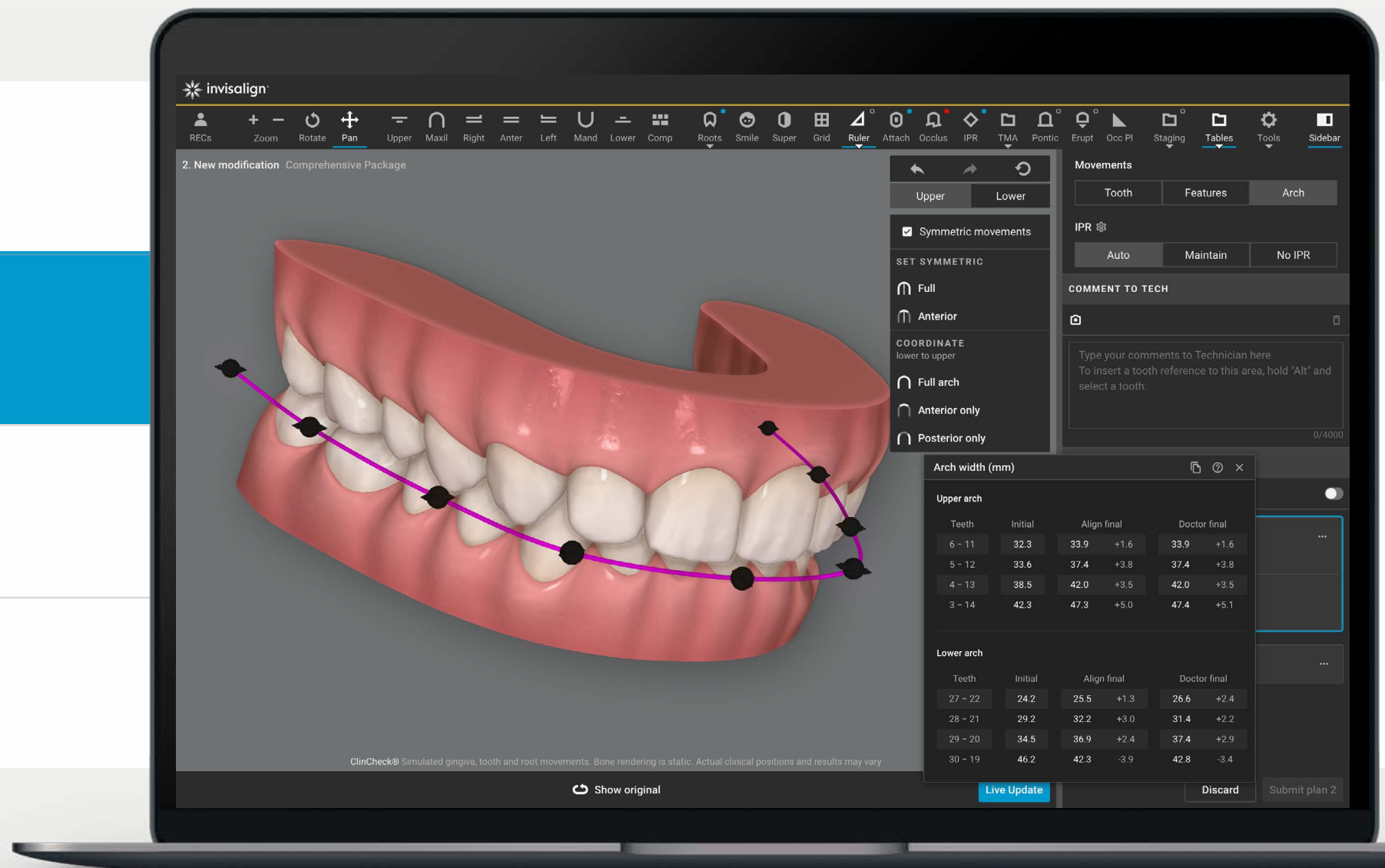

Anpassungen mit 3D-Steuerung

Mithilfe der **3D-Steuerung** können Sie Änderungen an Ihrem ursprünglichen Behandlungsplan in Echtzeit vornehmen.

Sie können **Ihren Behandlungsplan direkt selbst optimieren**, sodass Sie weniger schriftliche Kommentare für die CAD-Designer hinterlassen müssen.



Mehr Unabhängigkeit

Mit der Möglichkeit, Änderungen am Behandlungsplan in Echtzeit vorzunehmen, haben Sie alles, was Sie für die Erzielung optimaler Ergebnisse benötigen, ohne auf einen CAD-Designer zurückgreifen zu müssen.



Einfache Visualisierung

Mithilfe der 3D-Steuerung können Sie auf einfache Weise Ursache und Wirkung Ihrer Entscheidungen auf den Behandlungsplan erkennen.



Optimierte Behandlungsplanung

Dank der hochpräzisen 3D-Steuerung können Sie mit ClinCheck® Live Update Ihre Behandlungsplanung noch feiner abstimmen.


Zahnposition bearbeiten

Zahnbogenform ändern

Lückenstand und ASR

Das ASR-Tool in der 3D-Steuerung bietet drei Optionen für die Kontrolle der approximalen Schmelzreduktion.

Umgang mit Attachments und Funktionen

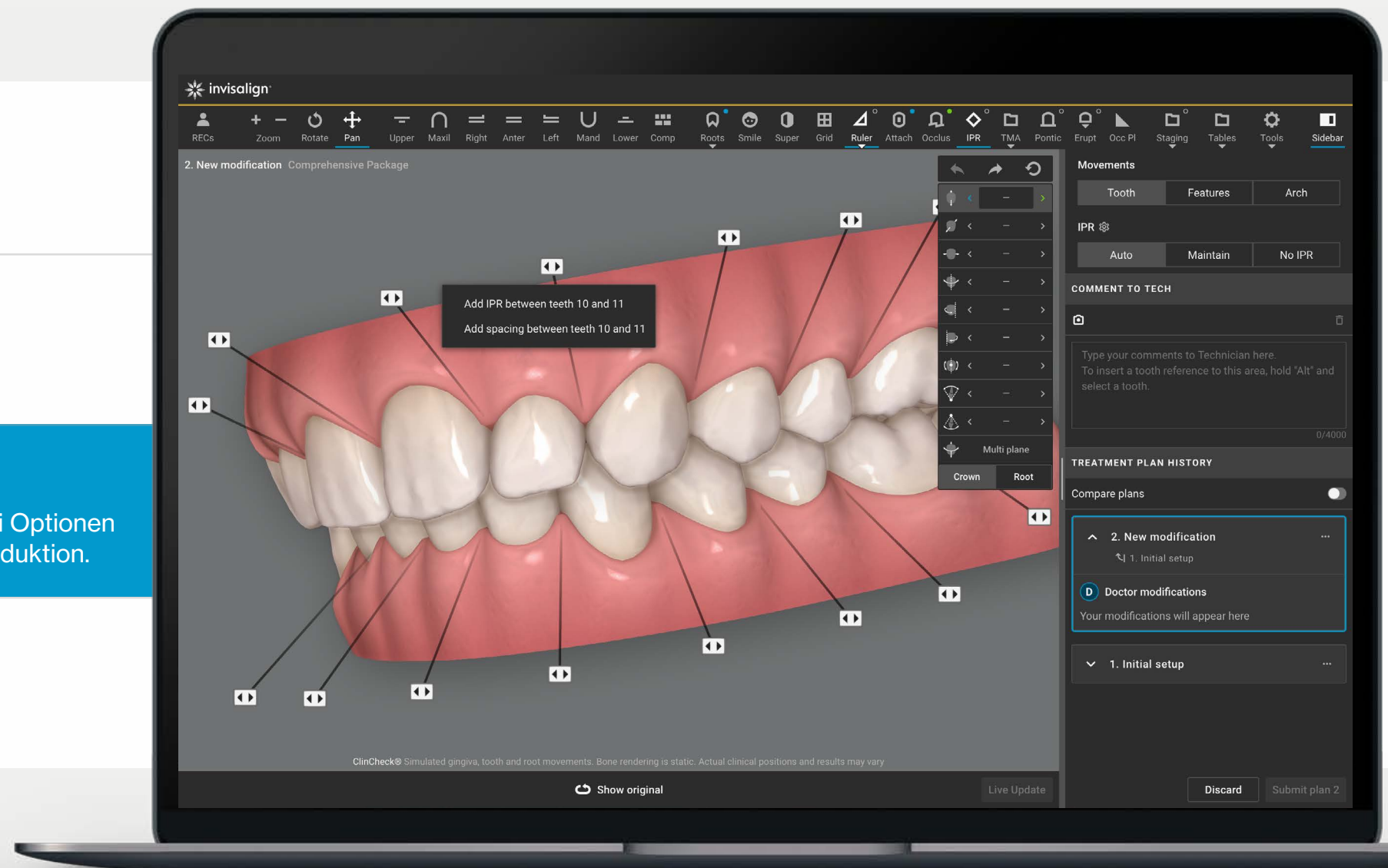

Anpassungen mit 3D-Steuerung

Mithilfe der **3D-Steuerung** können Sie Änderungen an Ihrem ursprünglichen Behandlungsplan in Echtzeit vornehmen.

Sie können **Ihren Behandlungsplan direkt selbst optimieren**, sodass Sie weniger schriftliche Kommentare für die CAD-Designer hinterlassen müssen.



Mehr Unabhängigkeit

Mit der Möglichkeit, Änderungen am Behandlungsplan in Echtzeit vorzunehmen, haben Sie alles, was Sie für die Erzielung optimaler Ergebnisse benötigen, ohne auf einen CAD-Designer zurückgreifen zu müssen.



Einfache Visualisierung

Mithilfe der 3D-Steuerung können Sie auf einfache Weise Ursache und Wirkung Ihrer Entscheidungen auf den Behandlungsplan erkennen.



Optimierte Behandlungsplanung

Dank der hochpräzisen 3D-Steuerung können Sie mit ClinCheck® Live Update Ihre Behandlungsplanung noch feiner abstimmen.


Zahnposition bearbeiten


Zahnbogenform ändern

Lückenstand und ASR

Umgang mit Attachments und Funktionen

Ziehen Sie konventionelle Attachments und andere Funktionen wie Precision Cuts per Drag & Drop auf das 3D-Modell.

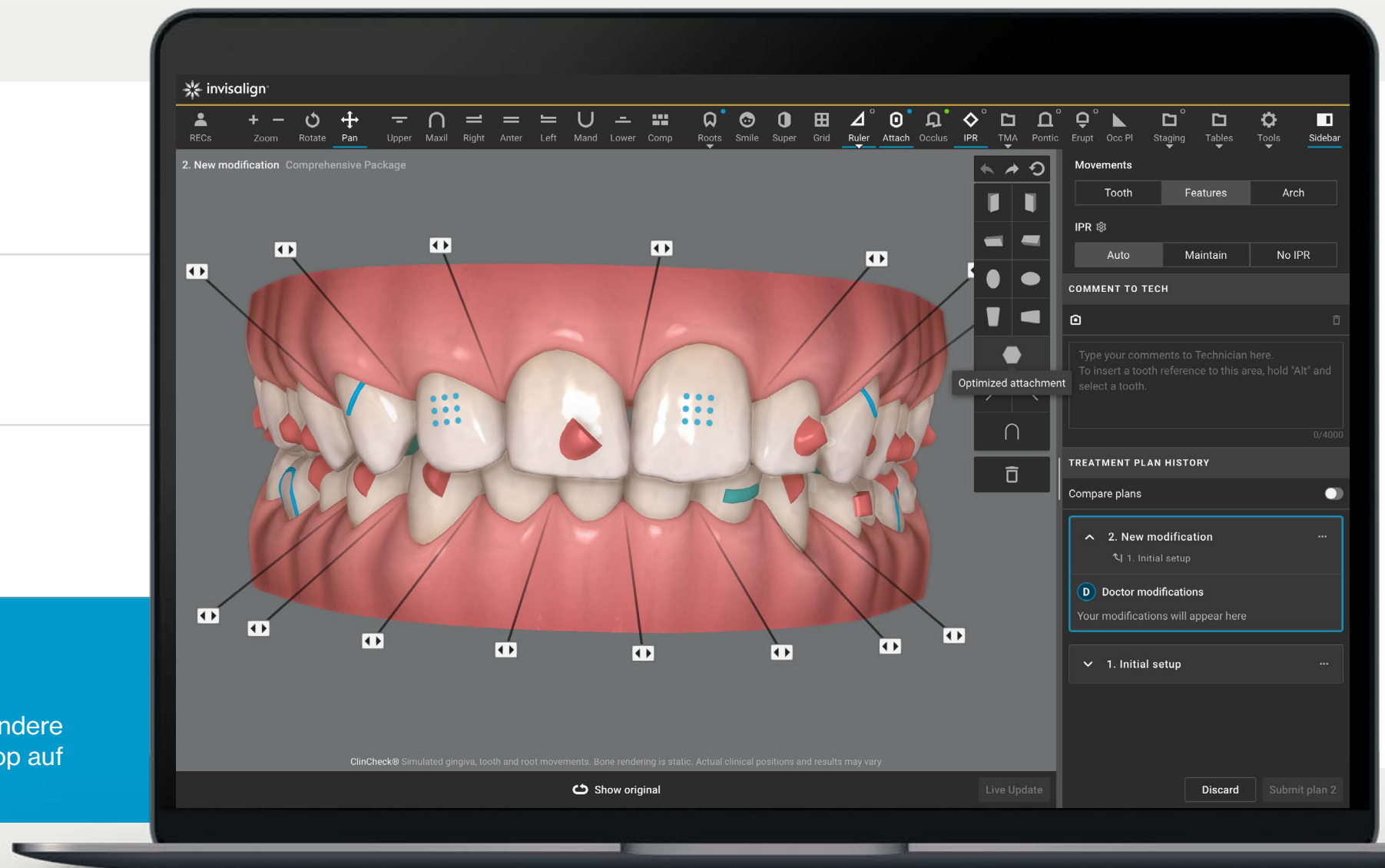

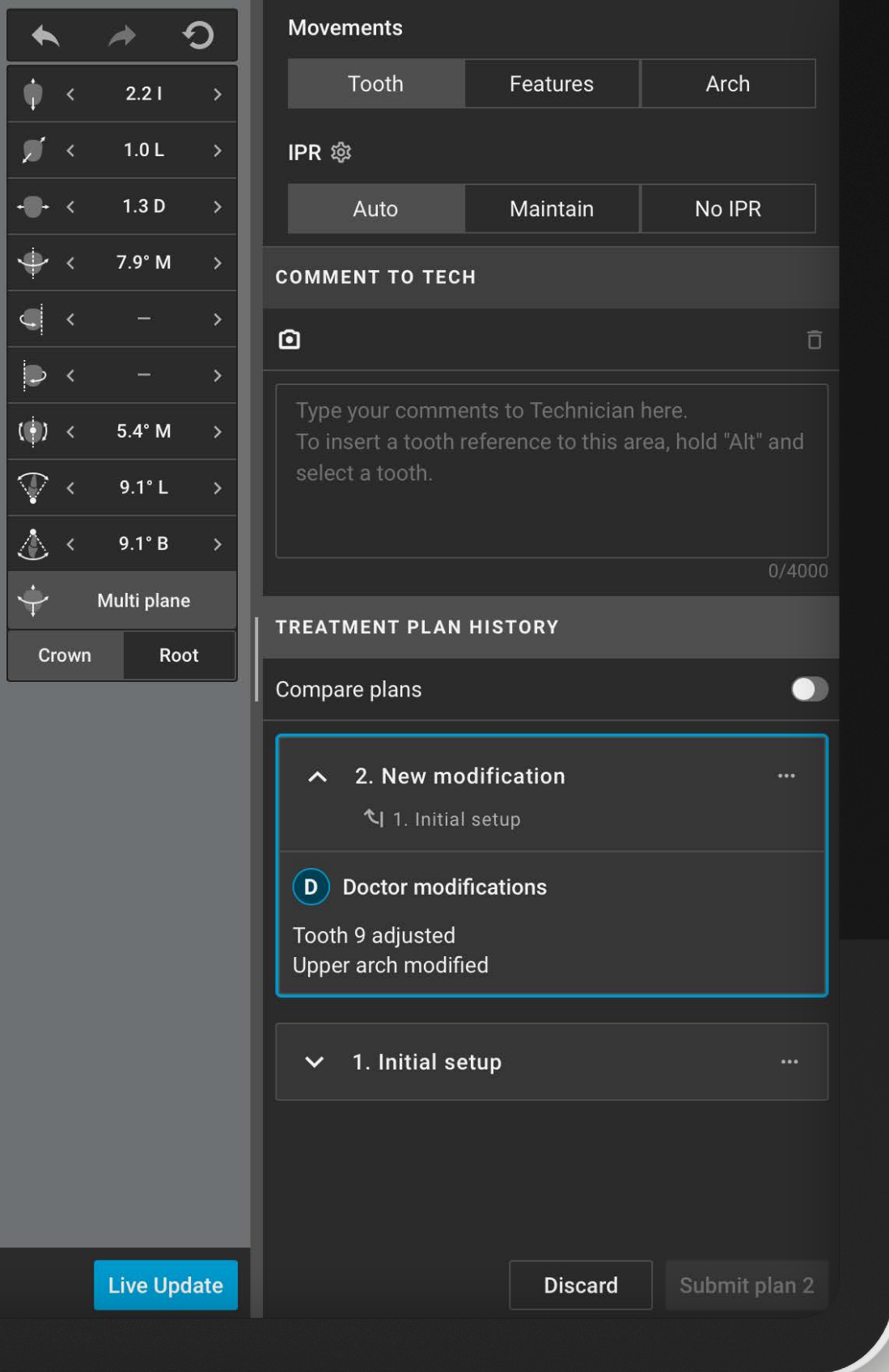

ClinCheck® Live Update mit 3D-Steuerung

Live Update

Sparen Sie wertvolle Zeit und behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Behandlungsplanung mit dem **ClinCheck® Live Update**. Sie können nun alle Änderungen an Ihren Behandlungsplänen in Echtzeit einsehen und bestätigen.



Gewinnen Sie Zeit

Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Live-Update“, um Ihre Änderungen am ClinCheck Behandlungsplan anzuzeigen und zu bestätigen – bis zu **82 % schneller**, innerhalb von Minuten statt Tagen.¹



Behalten Sie die volle Kontrolle über die Behandlungsplanung

Sie haben die volle Kontrolle und können **Änderungen direkt vornehmen und darstellen**, ohne jedes Mal mit einem CAD-Designer kommunizieren zu müssen.




Verbesserung der Patientenerfahrung durch kürzere Wartezeiten bis zum Behandlungsbeginn

90 % aller befragten Ärzte stimmten zu, dass die Verwendung von ClinCheck® Live Update eine **schnellere Lieferung von Alignern** ermöglicht.²

In-Face-Visualisierung

Mit diesem leistungsstarken Tool zur Patientenkommunikation können Sie Behandlungspläne in Echtzeit anhand einer Aufnahme des Gesichts Ihres Patienten anpassen. Das Tool nutzt neueste hochentwickelte Algorithmen, um dem Patienten in einer äußerst realistischen In-Face-Visualisierung zu veranschaulichen, wie sein zukünftiges Lächeln aussehen könnte.

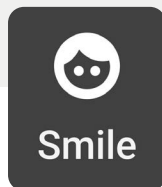

Die Schaltfläche „Smile“ aktiviert die Funktion „In-Face-Visualisierung“.

- Das Bild Ihres Patienten wird anhand eines Fotos eines breiten Lächelns generiert, das in die Invisalign Praxis App hochgeladen wurde.
- Die visuellen Darstellungen des Invisalign® Ergebnissimulator Pro in der iTero™ Plus Serie können auch im In-Face-Visualisierungstool verwendet werden.



Binden Sie Ihre Patienten ein

Verbessern Sie die Patientenkommunikation und steigern Sie das Verständnis der Patienten für die Behandlung, indem Sie ihnen eine Aufnahme ihres potenziellen neuen Lächelns zeigen.



Benutzerfreundlichkeit

Sie können weiterhin direkte Anpassungen am 3D-Modell vornehmen, während es mit einem Foto Ihres Patienten zusammengeführt wird.



Schnellere Behandlungsakzeptanz

96 % der befragten Ärzte gaben an, dass Patienten, denen eine ClinCheck® In-Face-Visualisierung gezeigt wurde, schneller in eine Invisalign® Behandlung einwilligen.³



ClinCheck® Smile Video

Das ClinCheck® Smile Video zeigt Patienten in einem kurzen Video den Weg zu ihrem möglichen zukünftigen Lächeln, und gibt ihnen die nötige Zuversicht, dem Behandlungsplan zuzustimmen.



Realistische Visualisierung der Behandlung

Erstellen Sie eine realistische Simulation des ClinCheck® Behandlungsplans anhand eines kurzen Videos, das das Gesicht Ihres Patienten beim Sprechen und Lächeln zeigt.




Gesteigertes Vertrauen in die Behandlung

Verwenden Sie das Video zur Veranschaulichung von Behandlungsplänen, damit sich Patienten ein besseres Bild von ihrem möglichen zukünftigen Lächeln machen können.




Exzellente Technologie

Die innovative Simulation bietet einen außergewöhnlichen Vorher-Nachher-Video-Vergleich und verschafft Ihrer Praxis einen technologischen Vorsprung.

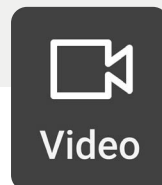

- 1 Importieren von Videoaufnahmen aus der Invisalign® Praxis App
- 2 Drei Visualisierungsoptionen, mit der Möglichkeit, anfängliche und simulierte Videos nebeneinander anzuzeigen
- 3 Zeigen Sie Ihrem Patienten das Video während eines virtuellen oder persönlichen Termins.

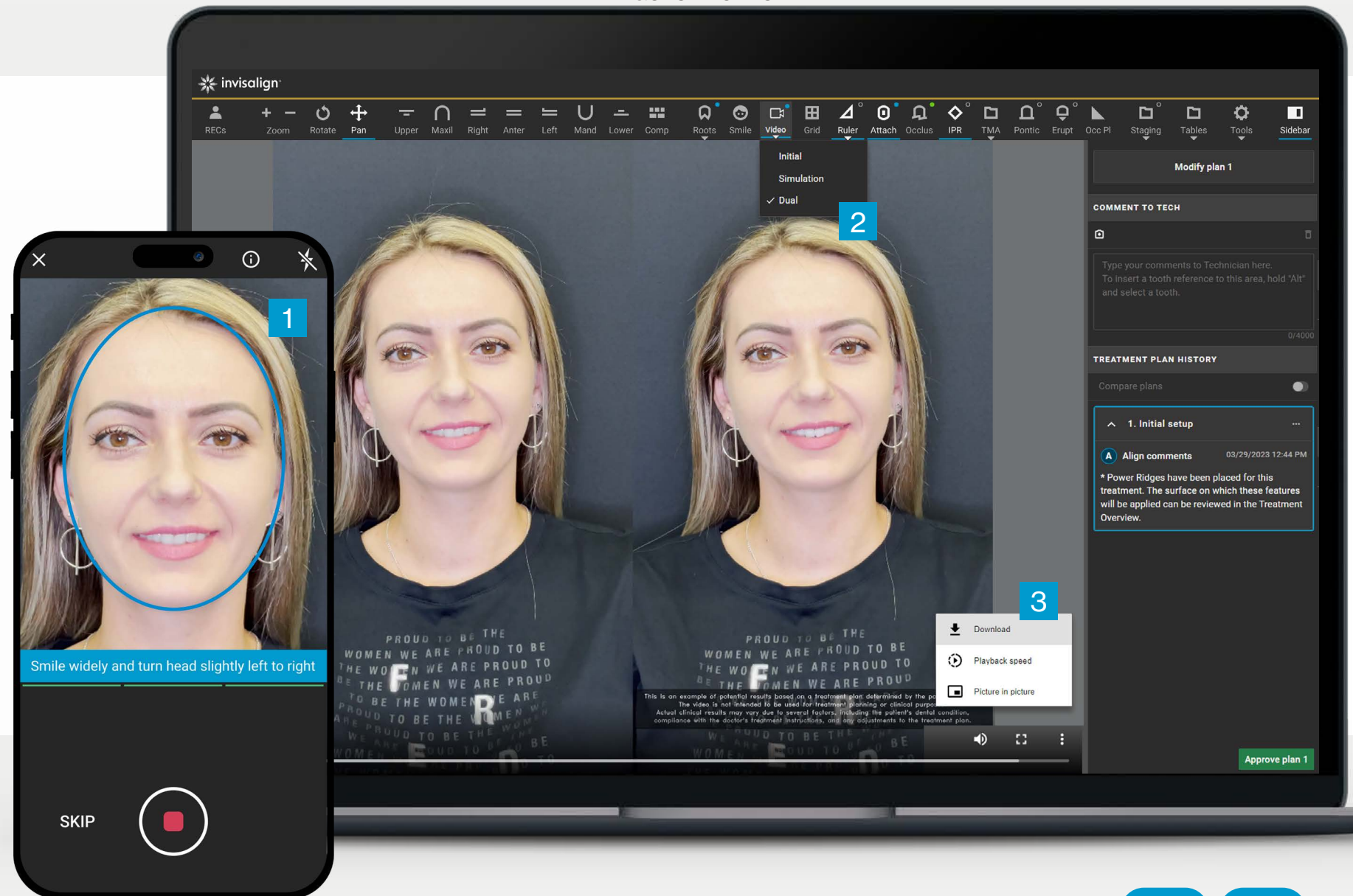

DVT-Integration

Die DVT-Integration für die ClinCheck® Software ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Wurzeln, Knochen und nicht durchgebrochenen Zähnen in einem automatisch generierten 3D-Modell.

Die DVT-Integration ist mit dem ClinCheck® Live Update mit 3D-Steuerung kompatibel und hilft Ihnen, den Behandlungsverlauf individuell zu gestalten, um unerwünschte Komplikationen zu vermeiden und eine Vielzahl von Fällen souverän zu behandeln.



Übersichtlich und benutzerfreundlich

92 % der befragten Ärzte gaben an, dass sie ihre **Zuversicht bei der Behandlung von Patienten mit transparenten Invisalign®** Alignern den erweiterten Möglichkeiten bei der Behandlungsplanung in der ClinCheck® Software zuschreiben.⁴



Individuelle Behandlungsplanung

100 % der befragten Ärzte gaben an, dass sie sich durch die Darstellung des Knochens* und der echten Wurzeln des Patienten in der ClinCheck® Behandlungsplanung ein besseres **Bild** machen und so **fundiertere Entscheidungen bei der Behandlungsplanung treffen können**.⁵



Erweitern Sie souverän Ihr Behandlungsspektrum

85 % der befragten Ärzte gaben an, dass die DVT-Integration in die ClinCheck® Software ihnen die **Zuversicht** gibt, ein breiteres Spektrum an Malokklusionen zu behandeln.⁶




Roots

Visualisieren Sie Wurzeln, Knochen und nicht durchgebrochene Zähne mittels DVT-Daten in einer dreidimensionalen Rekonstruktion.



Plane

Querschnitte in der ClinCheck® Software ermöglichen Ihnen die interaktive Untersuchung von Querschnittsansichten von Zähnen und Knochen aus fünf verschiedenen Schnittebenen.

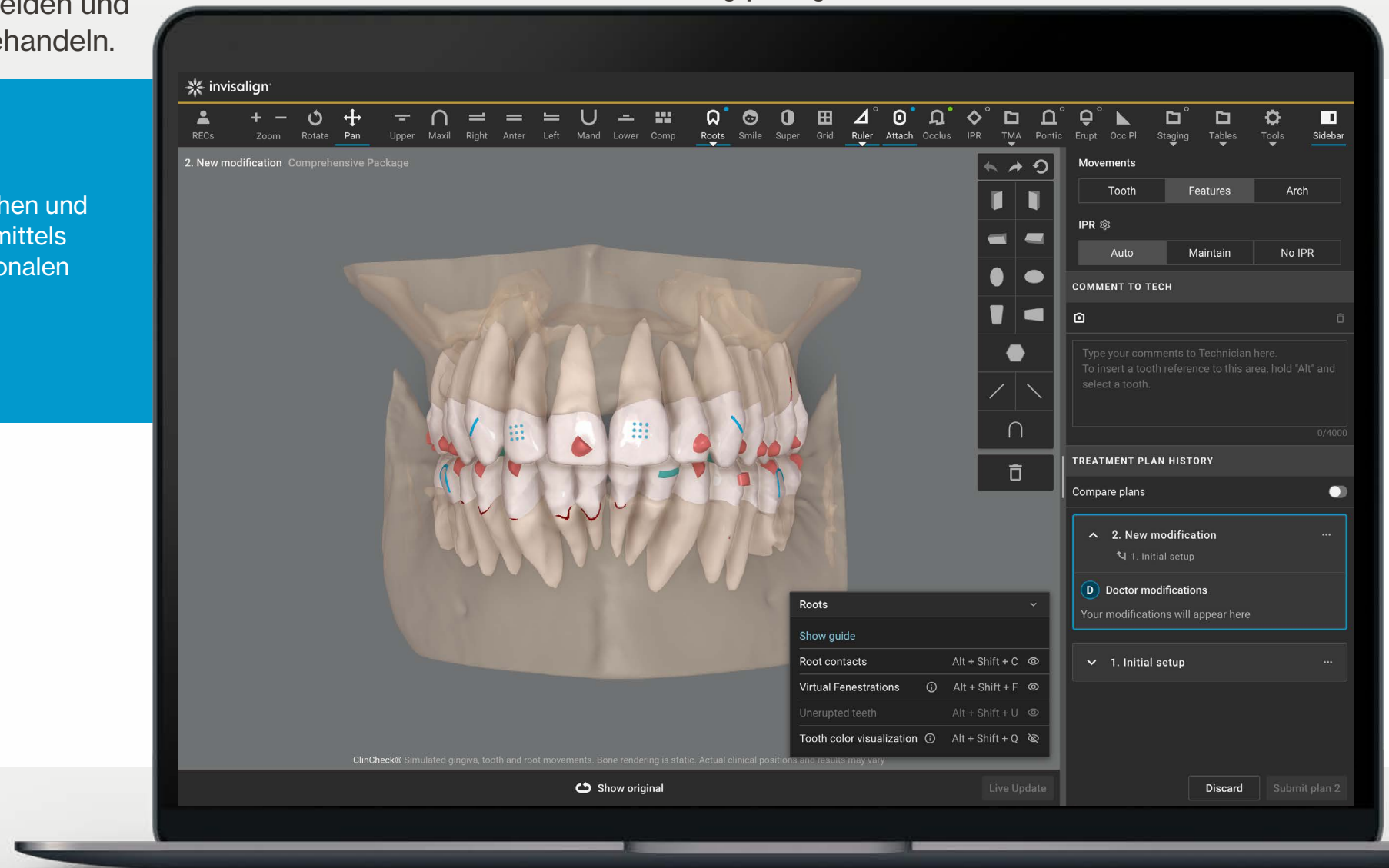

DVT-Integration

Die DVT-Integration für die ClinCheck® Software ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Wurzeln, Knochen und nicht durchgebrochenen Zähnen in einem automatisch generierten 3D-Modell.

Die DVT-Integration ist mit dem ClinCheck® Live Update mit 3D-Steuerung kompatibel und hilft Ihnen, den Behandlungsverlauf individuell zu gestalten, um unerwünschte Komplikationen zu vermeiden und eine Vielzahl von Fällen souverän zu behandeln.



Übersichtlich und benutzerfreundlich

92 % der befragten Ärzte gaben an, dass sie ihre **Zuversicht bei der Behandlung von Patienten mit transparenten Invisalign® Alignern** den erweiterten Möglichkeiten bei der Behandlungsplanung in der ClinCheck® Software zuschreiben.⁴




Individuelle Behandlungsplanung

100 % der befragten Ärzte gaben an, dass sie sich durch die Darstellung des Knochens* und der echten Wurzeln des Patienten in der ClinCheck® Behandlungsplanung ein besseres **Bild** machen und so **fundiertere Entscheidungen bei der Behandlungsplanung treffen können**.⁵



Erweitern Sie souverän Ihr Behandlungsspektrum


85 % der befragten Ärzte gaben an, dass die DVT-Integration in die ClinCheck® Software ihnen die **Zuversicht** gibt, ein breiteres Spektrum an Malokklusionen zu behandeln.⁶

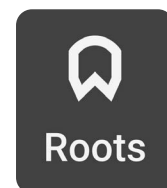

Visualisieren Sie Wurzeln, Knochen und nicht durchgebrochene Zähne mittels DVT-Daten in einer dreidimensionalen Rekonstruktion.



Querschnitte in der ClinCheck® Software ermöglichen Ihnen die interaktive Untersuchung von Querschnittsansichten von Zähnen und Knochen aus fünf verschiedenen Schnittebenen.

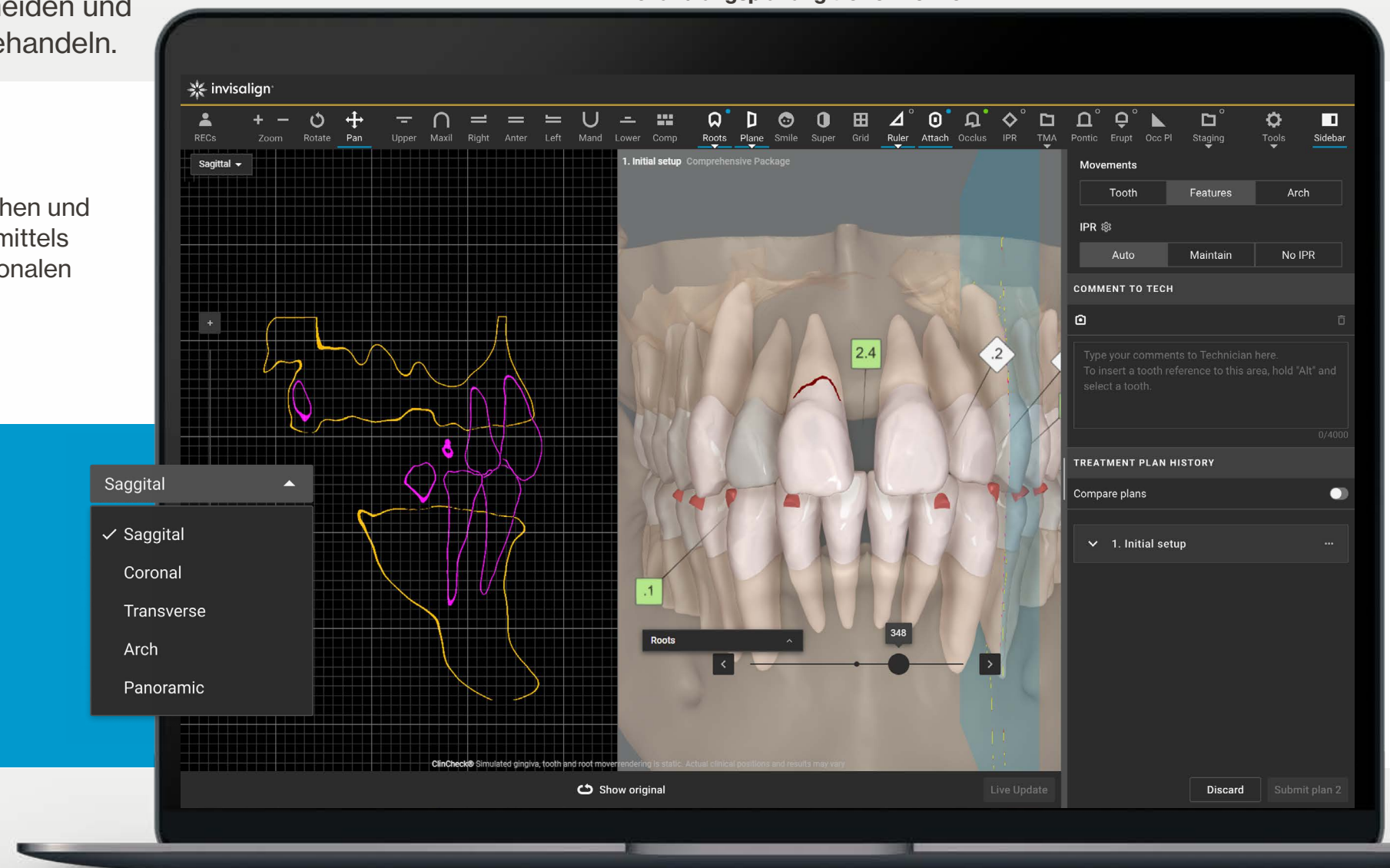

Invisalign Smile Architect™ Software

Invisalign Smile Architect™ ist eine effektive Lösung zum Smile Design, die auf einer einzigen Plattform sowohl die Zahnbegradigung als auch die restaurative Behandlungsplanung kombiniert. So können Sie Ihren Patienten eine außergewöhnliche Behandlungserfahrung bieten und gleichzeitig deren dauerhafte Mundgesundheit fördern.



Eine einzige Plattform

Die Kombination von gesichtsspezifischer und kieferorthopädisch-restaurativer Behandlungsplanung innerhalb der ClinCheck® Software ermöglicht eine flexible Berücksichtigung einer Vielzahl von Patientenbedürfnissen.




Individuelle Behandlungsplanung

Planen Sie Ihren Fall mit Blick auf das endgültige Behandlungsziel und im Einklang mit den gesichtsspezifischen Merkmalen des Patienten. Dies unterstützt Sie dabei, hervorragende Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig eine gesunde Zahnstruktur zu erhalten.



Eine außergewöhnliche Patientenerfahrung

97 % der befragten Ärzte gaben an, dass die Invisalign Smile Architect™ Software die **Kommunikation mit den Patienten** über mögliche Optionen für den kieferorthopädisch-restaurativen Behandlungsplan verbessert.⁷

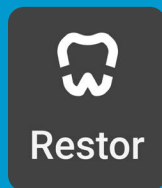


Die Schaltfläche für die Restaurativen Versorgung bietet eine Visualisierung des Smile Designs mit gleichzeitiger Überlagerung Ihres restaurativen Behandlungsplans.



Die Schaltfläche für die Zahnmassenanalyse ermittelt die Abweichung von der aktuellen Okklusion zum gewünschten Smile Design und leitet daraus das erforderliche Ausmaß an Zahnreduktion und/oder Zahnzusatz ab.

Mittels der aktivierten Schaltfläche „Smile“ werden Gesichtslinien automatisch auf dem Gesicht abgebildet – in Verbindung mit der Schaltfläche für die Restaurativen Versorgung oder jener für die Zahnmassenanalyse.

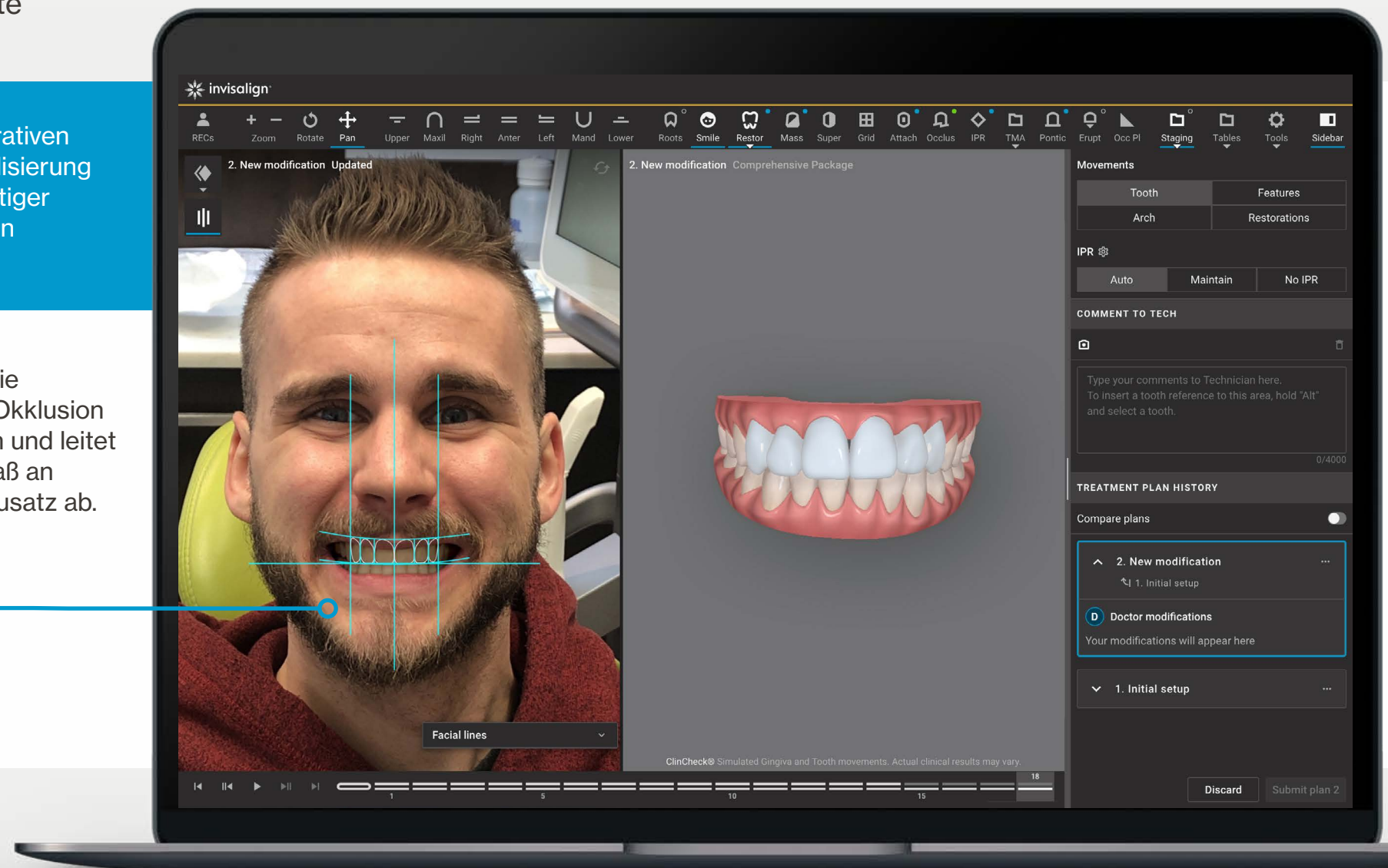

Invisalign Smile Architect™ Software

Invisalign Smile Architect™ ist eine einzigartige Lösung zum Smile Design, die auf einer einzigen Plattform sowohl die Zahnbegradigung als auch die restaurative Behandlungsplanung kombiniert. So können Sie Ihren Patienten eine außergewöhnliche Behandlungserfahrung bieten und gleichzeitig deren dauerhafte Mundgesundheit fördern.



Eine einzige Plattform

Die Kombination von gesichtsspezifischer und kieferorthopädisch-restaurativer Behandlungsplanung innerhalb der ClinCheck® Software ermöglicht eine flexible Berücksichtigung einer Vielzahl von Patientenbedürfnissen.




Individuelle Behandlungsplanung

Planen Sie Ihren Fall mit Blick auf das endgültige Behandlungsziel und im Einklang mit den gesichtsspezifischen Merkmalen des Patienten. Dies unterstützt Sie dabei, hervorragende Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig eine gesunde Zahnstruktur zu erhalten.




Eine außergewöhnliche Patientenerfahrung

97 % der befragten Ärzte gaben an, dass die Invisalign Smile Architect™ Software die **Kommunikation mit den Patienten** über mögliche Optionen für den kieferorthopädisch-restaurativen Behandlungsplan verbessert.⁷

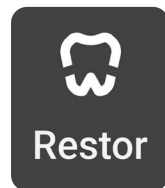

Restor


Die Schaltfläche für die Restaurativen Versorgung bietet eine Visualisierung des Smile Designs mit gleichzeitiger Überlagerung Ihres restaurativen Behandlungsplans.

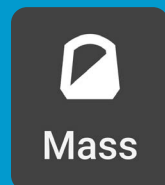


Mass

Die Schaltfläche für die Zahnmassenanalyse ermittelt die Abweichung von der aktuellen Okklusion zum gewünschten Smile Design und leitet daraus das erforderliche Ausmaß an Zahnreduktion und/oder Zahnzusatz ab.

Mittels der aktivierten Schaltfläche „Smile“ werden Gesichtslinien automatisch auf dem Gesicht abgebildet – in Verbindung mit der Schaltfläche für die Restaurativen Versorgung oder jener für die Zahnmassenanalyse.

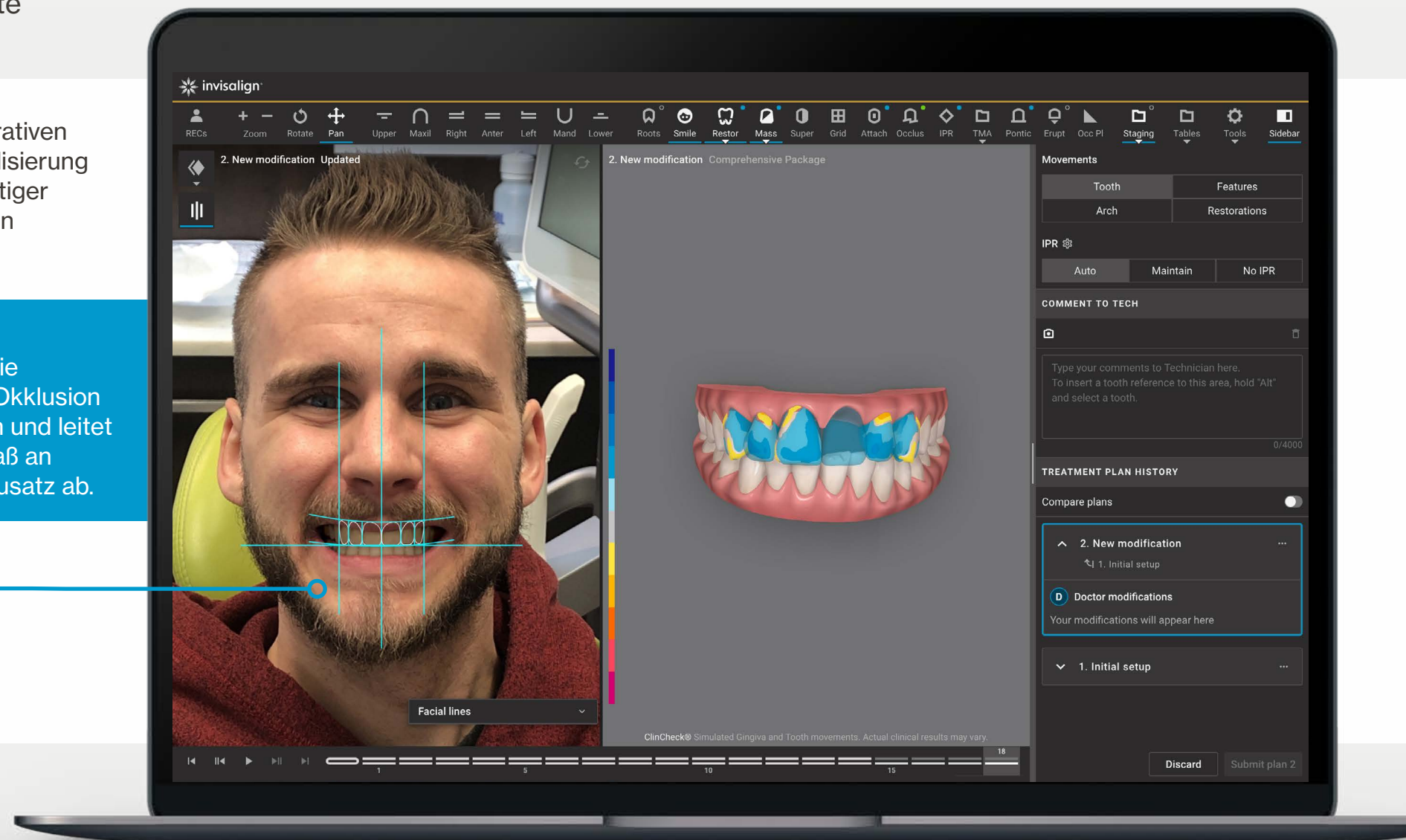

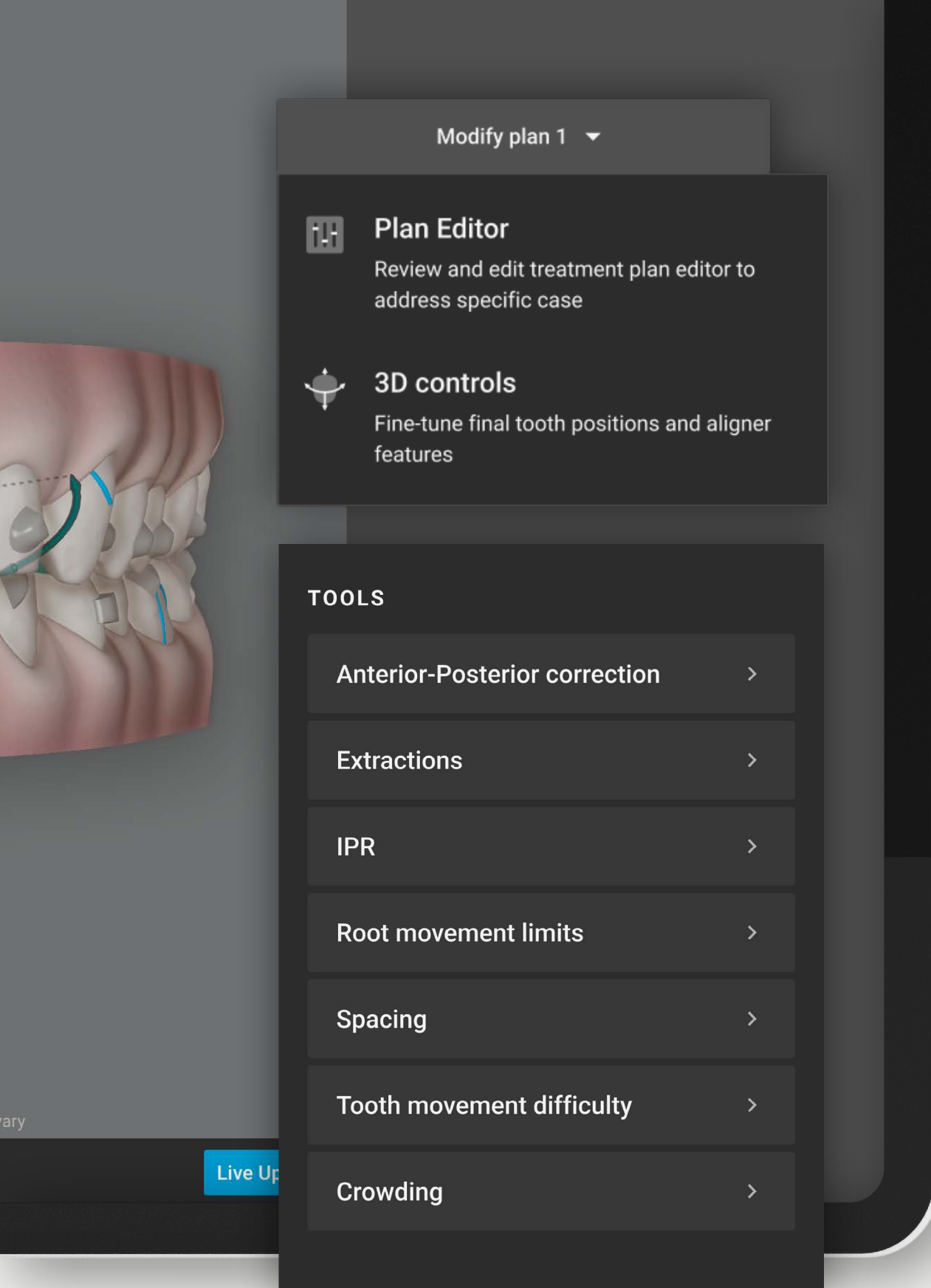

Der Plan Editor in der ClinCheck® Software

Preferences Template applied

Der Plan Editor ist nur mit Vorlagen für Präferenzen wie dem personalisierten Invisalign® Behandlungsplan verfügbar und wird für ausgewählte Fälle verwendet, in denen Ihr gewünschter Behandlungsplan von Ihren üblichen Behandlungspräferenzen abweicht.

Mit dem Plan Editor können wesentliche Änderungen am Behandlungsplan schnell und einfach vorgenommen werden – für mehr Kontrolle und einen geringeren Zeitaufwand.



Flexibel und anpassbar

Sie können wesentliche Änderungen selbst vornehmen, Behandlungspläne zum direkten Vergleich nebeneinander darstellen und individuell für den jeweiligen Fall anpassen.



Effizient und zeitsparend

Änderungen werden mit einem Klick auf die Schaltfläche „ClinCheck® Live Update“ innerhalb weniger Minuten angezeigt. Das spart Zeit, erfordert keine schriftlichen Kommentare und lenkt nicht von der Behandlungsplanung ab.



Bessere Kontrolle über Ihre Behandlungspläne

Jetzt können Sie Ihre Behandlungspläne direkt und in Echtzeit bearbeiten, rückgängig machen oder wiederherstellen, und neue Behandlungsansätze testen, ohne auf die Rücksendung eines Behandlungsplans warten zu müssen.

Zusätzliche Tools

Des Weiteren stehen Ihnen folgende Tools zur Unterstützung einer fundierteren Entscheidungsfindung bei der Behandlungsplanung zur Verfügung:


Überlagerungsansicht

Überlagern Sie das ursprüngliche Gebiss Ihres Patienten mit den vorgeschlagenen Bewegungen der einzelnen Stufen.





Rasteransicht

Nutzen Sie die Modellansicht, die die zu erwartenden klinischen Ergebnisse, wie die Korrektur des Tiefbisses in Millimetern, darstellen kann.

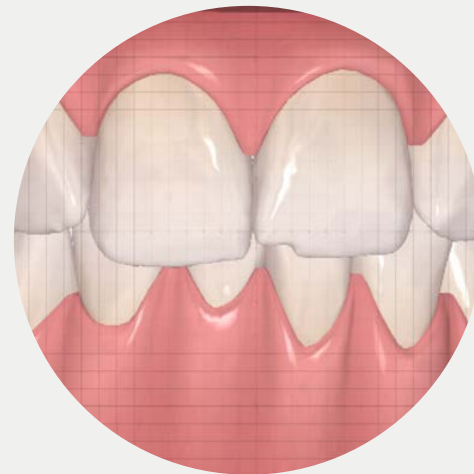

Bolton Analyse

Gewährleisten Sie eine ästhetische Behandlungsplanung und eine optimale Relation zwischen den Zahnbögen unter Berücksichtigung der Zahngröße Ihres Patienten.

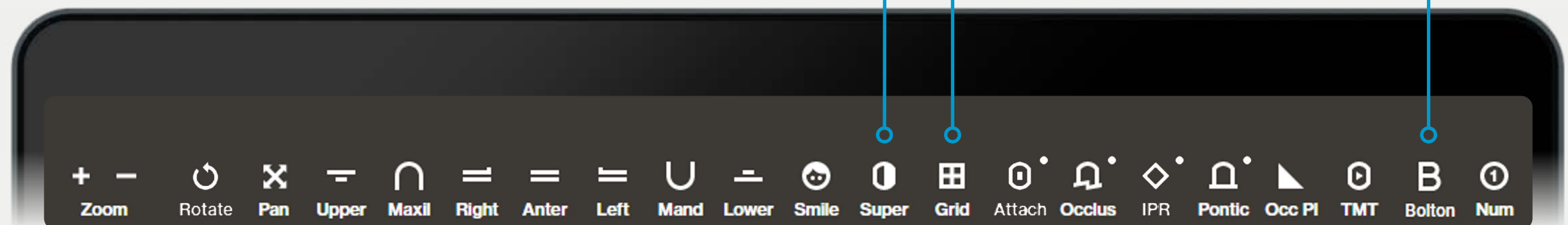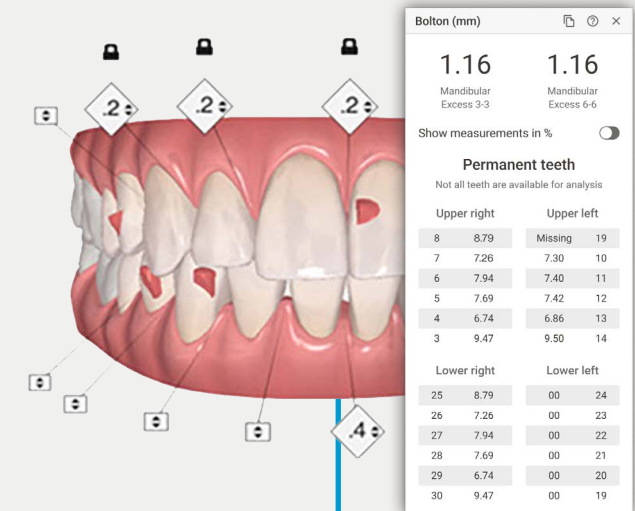

Literaturnachweise

1. Daten gespeichert – Mittlerer Zeitaufwand pro Fall (vom ersten CC bis zur CCA):

- für Fälle mit Live Update (nur Live Update): 15 Stunden;

- für Fälle ohne Live Update (nur Kommentare an den CAD-Designer): 3 Tage 13 Stunden

Basierend auf der Auswertung von Erstbestellungen (n = 50 114) des Invisalign System Comprehensive (ohne IPL-Fälle) durch Anwender (n = 165 Kieferorthopäden und Zahnärzte in Nordamerika, EMEA, im asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika), die an einer beschränkten Markteinführung teilnahmen. Die Teilnehmer nutzten ausschließlich ClinCheck Live-Update mit 3D-Steuerung für Änderungen am ClinCheck Behandlungsplan und wurden mit Anwendern verglichen, die für Änderungen am ClinCheck Behandlungsplan ausschließlich mit CAD-Designern zusammenarbeiteten (Beobachtungszeitraum: 1. Juni 2021 bis 23. Dezember 2021). Gemessen wurde die Dauer vom erstmaligen Öffnen bis zur endgültigen Bestätigung des ClinCheck Behandlungsplans.

2. Basierend auf einer Befragung von n=65 Invisalign Anwendern (48 Kieferorthopäden (74 %) und 17 Zahnärzte (26 %)), die die Option Live Update bei mindestens einem (1) Invisalign Fall eingesetzt haben [Dezember 2021]. Die Zahnärzte und Kieferorthopäden sollten die Aussage „Das ClinCheck Live Update ermöglicht eine schnellere Lieferung von Alignern“ auf einer 4-Punkte-Skala von „stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“ bewerten. Befragt wurden als Zahnarzt oder Kieferorthopäde tätige Invisalign Anwender in Amerika, in Lateinamerika, im EMEA-Raum und im asiatisch-pazifischen Raum. Daten bei Align Technology gespeichert; Stand: 23. Dezember 2021.

3. In einer globalen Befragung wurden Invisalign Anwender, die die ClinCheck In-Face-Visualisierung 10 Mal oder öfter verwendet haben (n=152) gefragt, ob sie der folgenden Aussage zustimmen: „Patienten, die sich mithilfe der In-Face-Visualisierung ihr mögliches zukünftiges Lächeln ansehen können, stimmen ihrem Behandlungsplan schneller zu als Patienten, denen die In-Face-Visualisierung nicht gezeigt wurde.“ Die Skala der Zustimmung reichte von 1 – 4, wobei 1 „stimme überhaupt nicht zu“ und 4 „stimme sehr zu“ bedeuteten. Die Befragung umfasste die folgenden Märkte: USA, Kanada, Brasilien, Großbritannien, Deutschland, Österreich, Schweiz, Australien, Neuseeland, Japan, Hongkong und Taiwan. Daten bei Align Technology gespeichert; Stand: 4. Oktober 2021.

4. Basierend auf einer Befragung von n=40 zertifizierten Invisalign Anwendern, die in den vergangenen 6 Monaten einen (1) oder mehr Invisalign Fälle mit der Funktion DVT-Integration eingereicht haben. Diese Ärzte wurden gefragt, ob sie der folgenden Aussage zustimmen: „Die Funktion der DVT-Integration mit ihren erweiterten Fähigkeiten zur Behandlungsplanung gibt mir die Zuversicht, Patienten mit den transparenten Invisalign Alignern zu behandeln.“ 4-Punkte-Skala, auf der Zustimmung = „Stimme stark zu“ oder „Stimme zu“ ist. Ausgewertet wurden die Antworten von zertifizierten Invisalign Anwendern in Nordamerika, Lateinamerika, im EMEA-Raum und im asiatisch-pazifischen Raum. Daten bei Align Technology gespeichert; Stand: 21. Oktober 2022.

5. Basierend auf einer Befragung von n=40 zertifizierten Invisalign Anwendern, die in den vergangenen 6 Monaten einen (1) oder mehr Invisalign Fälle mit der Funktion DVT-Integration eingereicht haben. Diese Ärzte wurden gefragt, ob sie der folgenden Aussage zustimmen: „Durch die Darstellung des Knochens und der echten Wurzeln des Patienten in der ClinCheck Behandlungsplanung kann ich mir ein besseres Bild machen und fundiertere Entscheidungen bei der Behandlungsplanung treffen.“ 4-Punkte-Skala, auf der Zustimmung = „Stimme stark zu“ oder „Stimme zu“ ist. Ausgewertet wurden die Antworten von zertifizierten Invisalign Anwendern in Nordamerika, Lateinamerika, im EMEA-Raum und im asiatisch-pazifischen Raum. Daten bei Align Technology gespeichert; Stand: 21. Oktober 2022.

6. Basierend auf einer Befragung von n=40 zertifizierten Invisalign Anwendern, die in den vergangenen 6 Monaten einen (1) oder mehr Invisalign Fälle mit der Funktion DVT-Integration eingereicht haben. Die Ärzte wurden nach ihrer Zustimmung zu folgender Aussage befragt: „Dank der Funktion der DVT-Integration und der erweiterten Möglichkeiten bei der Behandlungsplanung fühle ich mich in der Lage, ein breiteres Spektrum an Malokklusionen zu behandeln, darunter chirurgische und restaurative Versorgungen, Expansion/Extraktion sowie Fälle von jugendlichen Patienten mit impaktierten oder nicht durchgebrochenen Zähnen.“ 4-Punkte-Skala, auf der Zustimmung = „Stimme stark zu“ oder „Stimme zu“ ist. Ausgewertet wurden die Antworten von zertifizierten Invisalign Anwendern in Nordamerika, Lateinamerika, in EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum. Daten bei Align Technology gespeichert; Stand: 21. Oktober 2022.

7. Basierend auf einer weltweiten Umfrage von Dez. 2022 bis Jan. 2023 unter Zahnärzten (n=97; darunter Zahnärzte=85 und Kieferorthopäden=12) in Nordamerika, EMEA, Lateinamerika und der APAC-Region, die die kieferorthopädisch-restaurative Invisalign Smile Architect™ Software zur Behandlungsplanung im Rahmen einer begrenzten Markteinführung eingesetzt und zwischen August und November 2022 mehr als einen Fall eingereicht haben. Diese Zahnärzte wurden gebeten, anzugeben, inwieweit sie der folgenden Aussage zustimmen: „Durch den Einsatz der Invisalign Smile Architect™ Software konnte ich die Anzahl der Patienten erhöhen, die einer prärestaurativen kieferorthopädischen Behandlung zugestimmt haben“. Die Zustimmung wurde auf einer Skala von 1 bis 4 bewertet, wobei 1 für „stimme überhaupt nicht zu“ und 4 für „stimme voll und ganz zu“ steht. Daten bei Align Technology gespeichert; Stand: 25. Januar 2023.

*Die Align DVT-Integration in die ClinCheck Software führt keine Änderungen an der Anatomie oder Position des Knochens während oder am Ende der Behandlung durch. Die visuelle Darstellung des Alveolarknochens in der ClinCheck Software ist aktuell während der gesamten Behandlung statisch (im Gegensatz zur Darstellung von Zähnen, Zahnfleisch und Wurzeln).



Weitere Informationen finden Sie im
Align Weiterbildungsbereich

align™

© 2024 Align Technology, Inc. Align, Invisalign, iTero und ClinCheck sowie weitere
Bezeichnungen sind Handelsmarken von Align Technology Inc. A012582 Rev B