



invisalign mehr Kontrolle bei der Behandlungsplanung.

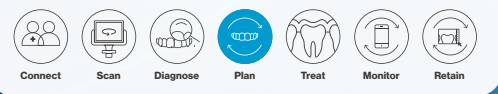

Der **Plan Editor**
in der ClinCheck® Software

Ändern Sie den Behandlungsansatz mit dem Plan Editor, bevor Sie Anpassungen mit der 3D-Steuerung vornehmen

Erreichen Sie Ihre Behandlungsziele mit einer Reihe von zusätzlichen Tools zur Veränderung des Behandlungsplans

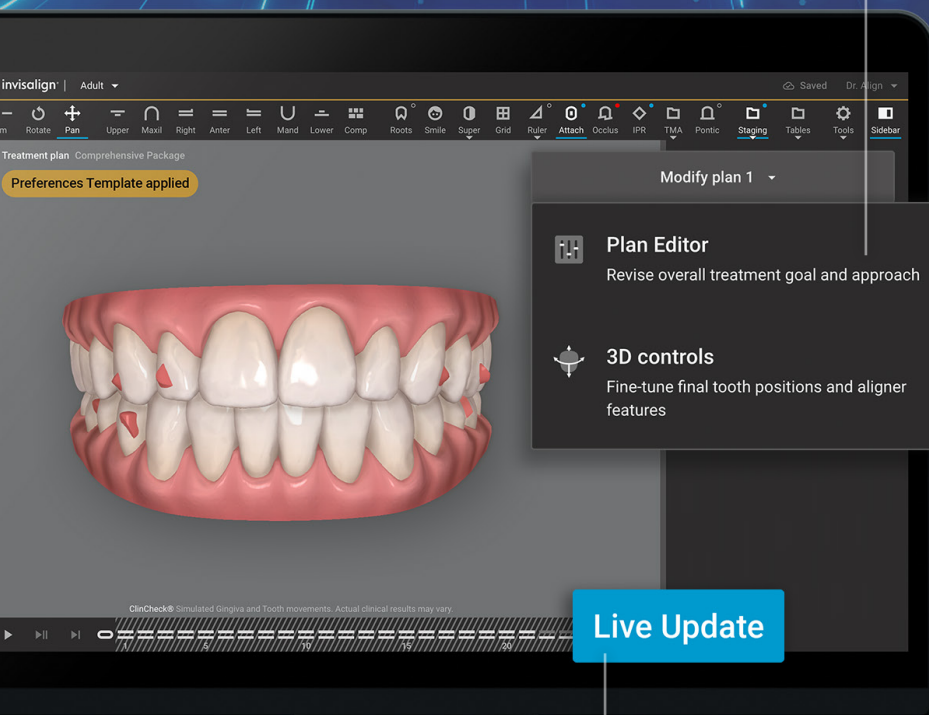

Mit dem ClinCheck® Live Update können Sie Änderungen in nur wenigen Minuten anzeigen und bestätigen

TOOLS

Anterior-Posterior correction >

Extractions >

IPR >

Root movement limits >

Spacing >

Tooth movement difficulty >

Crowding >


Tooth movement restrictions >

Mit dem Plan Editor der ClinCheck® Software können wesentliche Änderungen am Behandlungsplan schnell und einfach vorgenommen werden – für mehr Kontrolle und einen geringeren Zeitaufwand.


Der Plan Editor, ein neues optionales Tool, gibt Ihnen mehr Kontrolle über Ihre Behandlungspläne. Durch die Änderung von Behandlungszielen und -ansätzen können Sie Ihre klinischen Ergebnisse optimieren. Die umfangreichen Änderungsfunktionen des Plan Editors erweitern die präzisen Anpassungsmöglichkeiten der 3D-Steuerung und Aktualisierungen werden mit ClinCheck® Live Update in wenigen Minuten angezeigt.

So funktioniert es


Der Plan Editor ist nur verfügbar, wenn Sie eine Präferenzvorlage ausgewählt haben, z. B. einen personalisierten Invisalign Behandlungsplan, und sollte gezielt für Fälle verwendet werden, bei denen Sie das Behandlungsziel oder den Behandlungsansatz ändern oder Ihre regulären Behandlungspräferenzen nicht anwenden möchten.

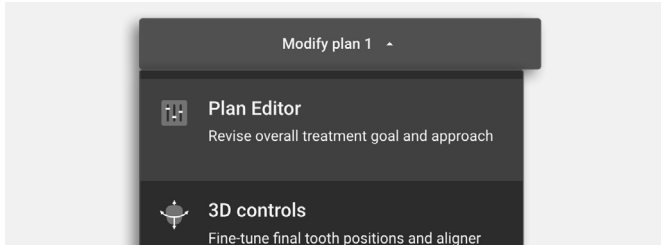


1. Wählen Sie einen beliebigen Fall in Ihrer Fallhistorie aus, gehen Sie zu „Behandlungsplan ändern“ und klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Plan Editor“.

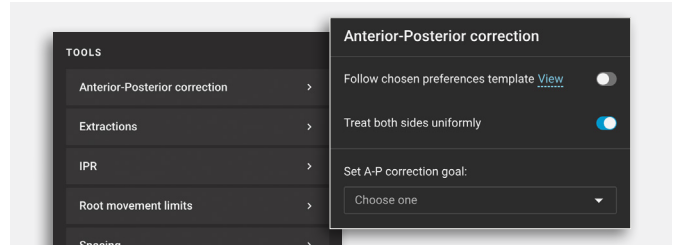

2. Wählen Sie ein oder mehrere Tools zur Ansicht der bestehenden Präferenzen aus und nehmen Sie Ihre Änderungen über die Ein-/Ausschalter vor.

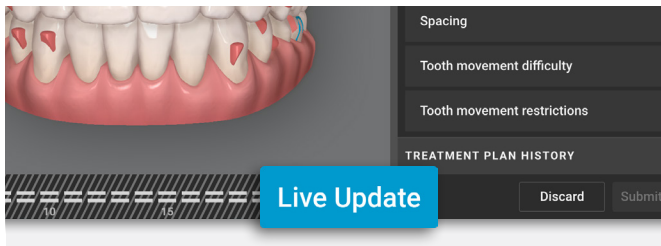

3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie auf „Live Update“, um die Änderungen in nur wenigen Minuten anzuzeigen.

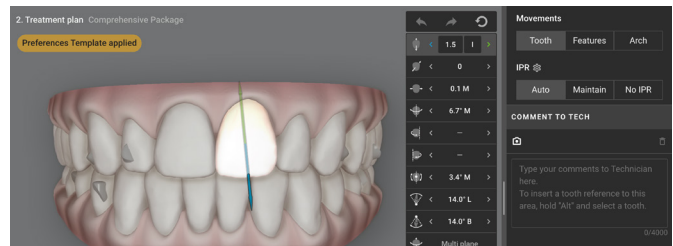

4. Wenn Sie die Änderungen mit dem Plan Editor abgeschlossen haben, können Sie Ihren aktualisierten Behandlungsplan entweder mit der 3D-Steuerung weiter anpassen oder ihn bestätigen.

Wesentliche Vorteile

Flexibel und anpassbar.


Sie können wesentliche Änderungen selbst vornehmen, Behandlungspläne zum direkten Vergleich nebeneinander darstellen und individuell für den jeweiligen Fall anpassen.

Effizient und zeitsparend.

Änderungen werden mit einem Klick auf „Live Update“ innerhalb weniger Minuten angezeigt. Das spart Zeit, erfordert keine schriftlichen Kommentare und lenkt nicht von der Behandlungsplanung ab.

Mehr Kontrolle bei Ihrer digitalen Behandlungsplanung.

Die Behandlungsplanung lässt sich jetzt besser steuern als je zuvor. Sie können Änderungen direkt vornehmen, rückgängig machen oder wiederherstellen, neue Behandlungsansätze testen, ohne darauf warten zu müssen, dass Ihr Behandlungsplan zurückgesandt wird.

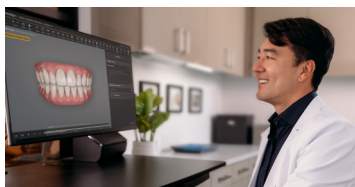

Transformation der kieferorthopädischen Behandlungsplanung. Tools der neuesten Generation ermöglichen eine noch nie dagewesene Effizienz und Flexibilität bei der Behandlungsplanung und ermöglichen so eine skalierbare Praxisentwicklung bei gleichzeitiger Zeitersparnis.

➤ Weitere Informationen finden Sie im Align Weiterbildungsbereich.