

F19AOS01

IT

SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA

Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in modo particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. In caso di dubbi, prima di utilizzare il dispositivo contattare l'azienda.

EN

SAFETY TIPS

Before installing and using the device, read the instructions for use and especially the safety warnings carefully and follow them. If in doubt, contact the company before using the device.

DE

SICHERHEITSTIPPS

Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Gebrauchsanweisung und insbesondere die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an das Unternehmen, bevor Sie das Gerät verwenden.

FR

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les instructions d'utilisation et en particulier les avertissements de sécurité, en les suivant. En cas de doute, contactez la société avant d'utiliser l'appareil.

ES

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Antes de instalar y usar el dispositivo, lea atentamente las instrucciones de uso y, en particular, las advertencias de seguridad, a continuación. En caso de duda, póngase en contacto con la empresa antes de usar el dispositivo.

IT

INFORMAZIONI GENERALI

Il dispositivo non presenta alcuna difficoltà interpretativa per l'uso nemmeno per persone con disabilità visiva, di lettura o cognitiva. Sono esclusi eventi che possono causare problemi di facilità di uso. Il dispositivo non deve essere smontato e non ha parti smontabili. Il dispositivo non ha massa complessiva maggiore di 10 kg. Il dispositivo non contiene sostanze cancerogene, mutagene o tossiche. È resistente alla corrosione e alle variazioni di temperatura.

EN

GENERAL INFORMATION

The device is safe to use, even for people with reduced visual, reading or cognitive abilities. There are no circumstances hampering ease of use of the product. The device must not be dismantled and does not have dismantable parts. The device's overall weight does not exceed 10 kg. The device does not contain carcinogenic, mutagenic or toxic substances. It is capable of withstanding corrosion and temperature variations.

DE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Um das Gerät zu benutzen, sind keine besonderen Fachkenntnisse, so dass es auch von Personen mit Seh-, Lese- und kognitiven Einschränkungen benutzt werden kann. Die Einfachheit der Anwendung ist in allen Situationen gegeben. Das Gerät darf nicht zerlegt werden und besitzt keine zerlegbaren Teile. Das Gesamtgewicht des Geräts liegt nicht über 10 kg. Das Gerät enthält keine krebserregenden, erbgutverändernden oder giftigen Stoffe. Es ist korrosionsbeständig und hält Temperaturschwankungen stand.

FR

INFORMATION GÉNÉRALES

Le dispositif ne présente aucune difficulté d'interprétation concernant son utilisation, même pour les personnes présentant une déficience visuelle, des difficultés de lecture ou de compréhension. Il n'existe aucune circonstance pouvant entraver la simplicité d'utilisation du dispositif. Le dispositif ne doit pas être démonté et ne comporte pas de parties démontables. Le poids global du dispositif ne dépasse pas 10kg. Le dispositif ne contient pas de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques. Il résiste à la corrosion et aux variations de température.

ES

INFORMACIÓN GENERAL

El dispositivo no presenta dificultades interpretativas para su uso incluso para personas con discapacidad visual, lectora o cognitiva. No presenta problemas de facilidad de uso. El dispositivo no debe desmontarse y no tiene piezas desmontables. El dispositivo no tiene una masa total superior a 10 kg. El dispositivo no contiene sustancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas. Es resistente a la corrosión y a las variaciones de temperatura.







IT


EN

DE

FR

ES

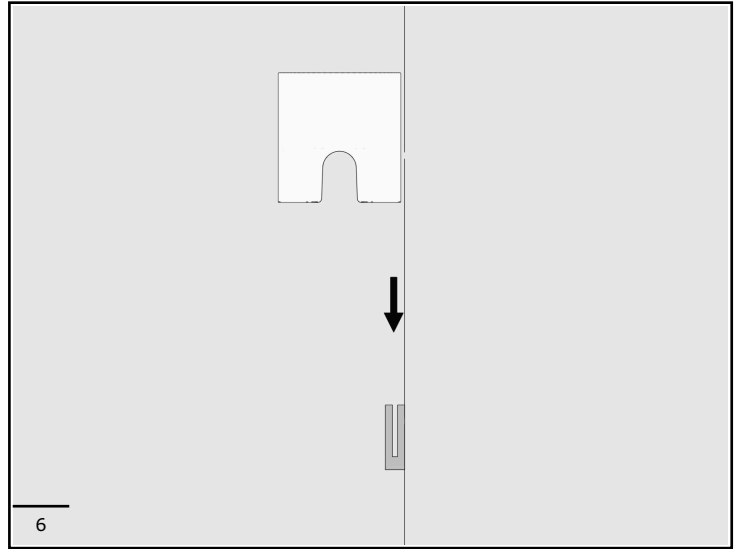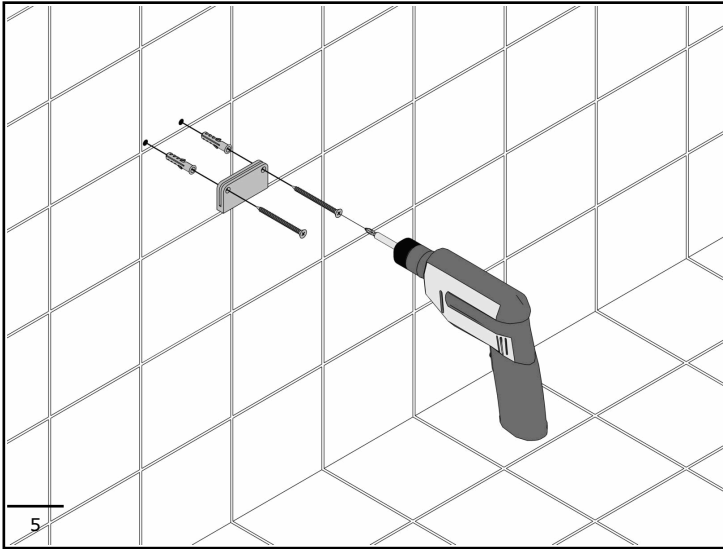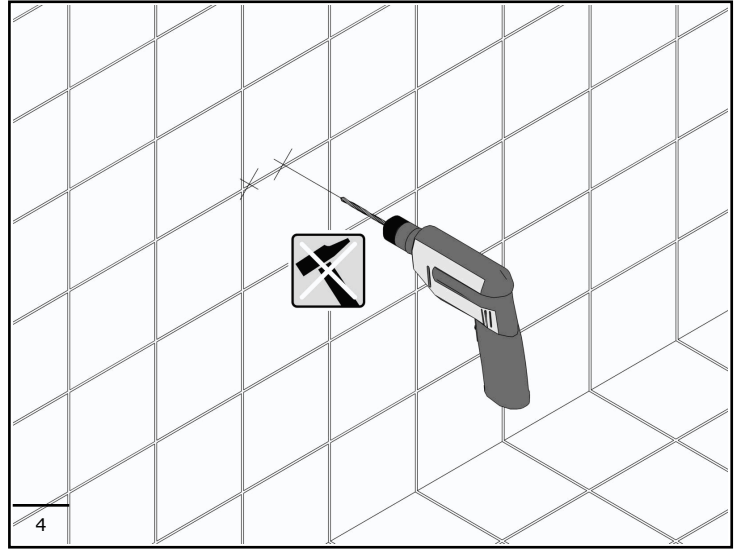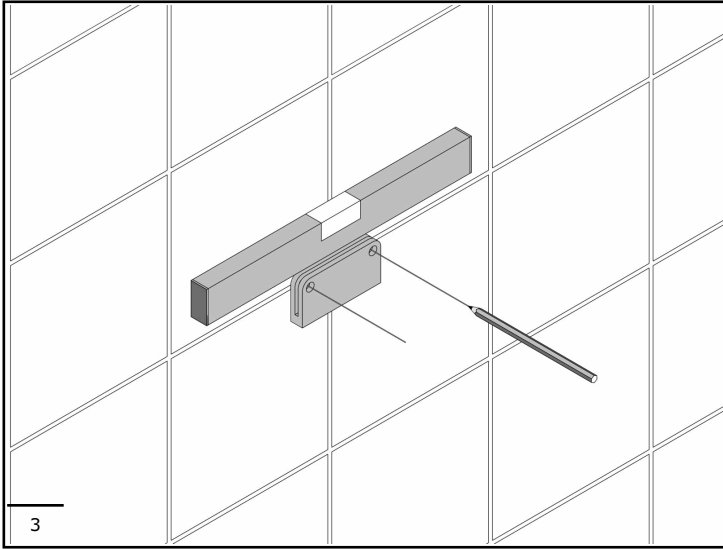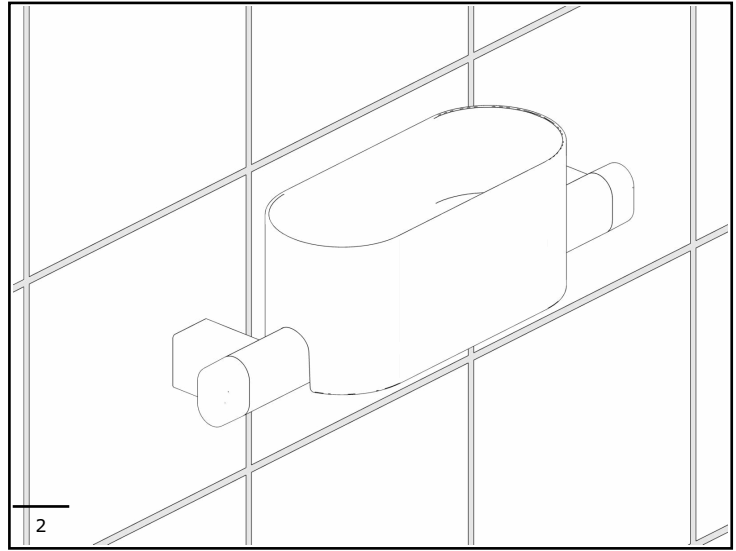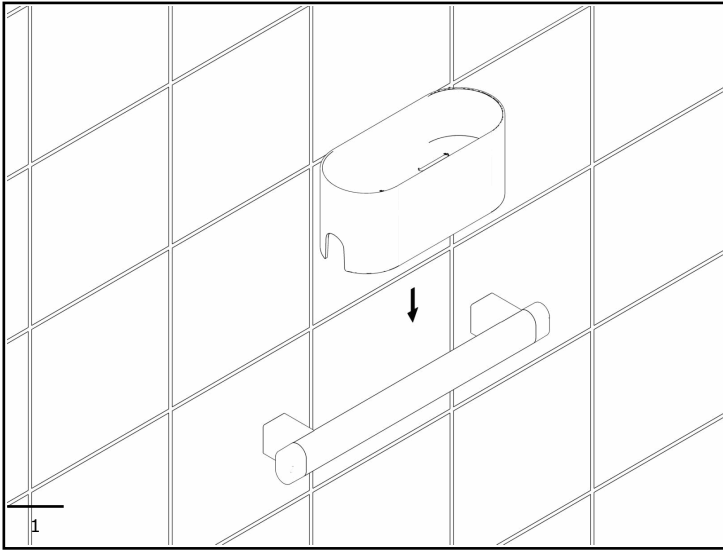

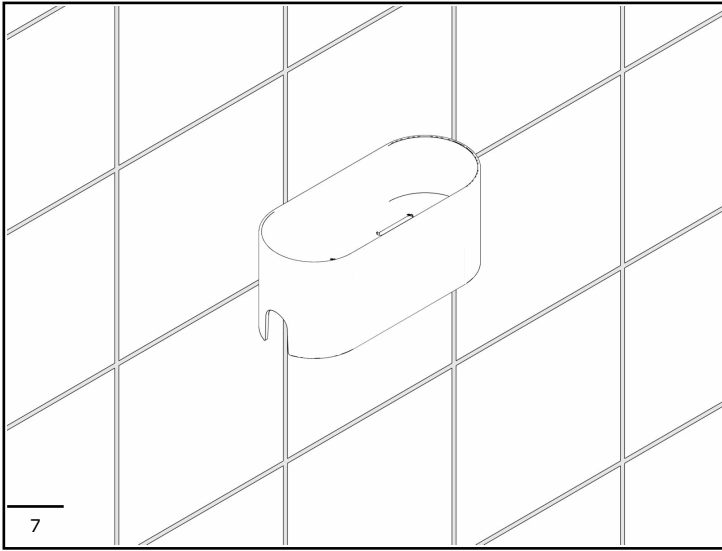

IT

ISTRUZIONI PER L'USO ACCESSORI GENERICI

Il dispositivo è un prodotto da utilizzare esclusivamente come accessorio. L'uso improprio, ad esempio per esercizi ginnici, può provocare infortuni con gravi conseguenze.
Non sottoporre il dispositivo a carico superiore a quello per cui è stato progettato.
Il superamento di questo valore può provocare danni permanenti sia al dispositivo sia alle persone.

EN

The device is a product to be used exclusively as accessory. Using the device improperly, for example for gymnastics exercises, can cause injuries with serious consequences.
Do not subject the device to loads exceeding for which it was designed.
Exceeding this load can cause permanent damage to the device or harm to people.
To ensure correct use of the device, the latter must be left free of any objects and be easily reachable.

DE

Das Gerät ist ein Produkt, das ausschließlich als Zubehör verwendet werden kann. Der unangemessene Gebrauch, um Gin zu trinken, kann mit großer Konsequenz Unglück hervorrufen. Das Gerät muss nicht an die Stelle kommen, an der es geplant ist.
Der Überschuss dieses Werts kann dazu führen, dass dann dauerhaft alle Menschen zum Dispositiv bringt.

FR

L'appareil est un produit à utiliser uniquement comme accessoire. Une utilisation inappropriée, par exemple pour des exercices de gymnastique, peut provoquer des blessures aux conséquences graves.
Ne soumettez pas l'appareil à une charge supérieure à celle pour laquelle il a été conçu.
Le dépassement de cette valeur peut causer des dommages permanents à la fois à l'appareil et aux personnes.

ES

El dispositivo es un producto para ser utilizado únicamente como accesorio. Un uso inadecuado, por ejemplo para ejercicios de gimnasia, puede provocar lesiones de graves consecuencias.
No someta el dispositivo a una carga superior a aquella para la que fue diseñado.
Superar este valor puede causar daños permanentes tanto al dispositivo como a las personas.

IT

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

Il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da personale competente e qualificato, (muratore o idraulico professionista) che dovrà verificare che gli elementi di fissaggio, qualora forniti, siano idonei per la parete di installazione.
Per garantire la stabilità e sicurezza il dispositivo deve essere fissato con tasselli e viti adeguati al tipo di muro.
Se il dispositivo dovesse risultare instabile sospendere l'uso fino a quando questo non sia stato controllato da un tecnico incaricato.
Il produttore non è responsabile per un montaggio del dispositivo non conforme a quanto riportato

EN

SAFETY PRECAUTIONS

The device must be installed by trained and qualified personnel (bricklayer or professional plumber) who must verify whether the fixing elements, if provided, are suitable for the relevant wall. To guarantee stability and safety, the device must be attached with wall plugs and screws suitable for the relevant type of wall.
Do not subject the device to loads exceeding those specified. If the device should become unstable, suspend its use until it is properly checked by the relevant technician.
The manufacturer declines all responsibility for installation of the device not conforming in this manual for use and maintenance.

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät muss von geschultem und qualifiziertem Personal (Maurer oder Fachinstallateur) installiert werden, das prüfen muss, ob die Befestigungselemente, falls vorhanden, für die jeweilige Wand geeignet sind. Um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten, muss das Gerät mit Dübeln und Schrauben befestigt werden, die für die jeweilige Wandart geeignet sind.
Belasten Sie das Gerät nicht über das angegebene Maß hinaus. Sollte das Gerät instabil werden, setzen Sie es bis zur fachgerechten Überprüfung durch den zuständigen Techniker außer Betrieb. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für eine

FR

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Le montage du dispositif doit être effectué par du personnel compétent et qualifié, (maçon ou plombier professionnel) qui devra vérifier que les éléments de fixation, à condition que si, sont adaptés au mur d'installation. Une fois l'installation effectuée, réaliser un ou plusieurs tests d'utilisation.
Pour garantir la stabilité et la sécurité, le dispositif doit être fixé avec des tasseaux et des vis adaptées au type de mur.
Ne pas soumettre le dispositif à une charge supérieure à celle indiquée.
En cas d'instabilité du dispositif, interrompre l'utilisation jusqu'à l'exécution d'une vérification par un technicien spécialisé.

ES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

La instalación del aparato debe ser realizada por personal competente y cualificado (albañil o fontanero profesional), que debe comprobar que los elementos de fijación, si se suministran, son adecuados para la pared de instalación. Para garantizar la estabilidad y la seguridad, el aparato debe fijarse con tacos y tornillos adecuados al tipo de pared. Si el aparato resultara inestable, suspenda su uso hasta que haya sido revisado por un técnico autorizado.
El fabricante no se hace responsable de ninguna instalación del aparato que no se ajuste a las presentes instrucciones de uso y

nel presente manuale di uso e manutenzione.

Installation des Geräts ab, die nicht mit dieser Betriebs- und Wartungsanleitung übereinstimmt.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de montage du dispositif non conforme aux indications mentionnées dans ce manuel d'utilisation et d'entretien.

mantenimiento.

IT

EN

DE

FR

ES

PULIZIA

Pulire la superficie del dispositivo con un panno umido bagnato con sapone neutro liquido (ad esempio detergente per stoviglie). E 'vietato l'uso di detergenti abrasivi liquidi contenenti cloro, acidi o basi forti, solventi concentrati come acetone e trielina o derivati, che possono causare opacizzazione del materiale. E 'vietato utilizzare fonti d'aria calda per l'asciugatura. Disinfettare la superficie del dispositivo utilizzando un prodotto tipo candeggina almeno una volta alla settimana.

CLEANING

Clean the surface of the device using a damp cloth wetted with liquid neutral soap (e.g. dish soap). It is forbidden to use abrasive liquid detergents containing chlorine, strong acids or bases, concentrated solvents such as acetone and trichloroethylene or derivatives, which may cause the material too dull. It is forbidden to use hot air sources for drying. Disinfect the device's surface using a bleach-type product at least once a week.

REINIGUNGS-UND PFLEGEHINWEISE

Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch, das mit flüssiger Neutralseife (z. B. Spülmittel) angefeuchtet ist. Es ist verboten, scheuernde, chlorhaltige Flüssigreiniger, starke Säuren oder Basen, konzentrierte Lösungsmittel wie Aceton und Trichlorethylen oder Derivate zu verwenden, die das Material zu stumpf machen können. Es ist verboten, Heißluftquellen zum Trocknen zu verwenden. Desinfizieren Sie die Oberfläche des Geräts mindestens einmal pro Woche mit einem bleichmittelähnlichen Produkt.

NETTOYAGE

Passer un chiffon humide, imbibé de savon neutre liquide de type liquide vaisselle, sur la surface du dispositif. Il est interdit d'utiliser des détergents liquides abrasifs, contenant du chlore, des acides ou des bases fortes, des solvants concentrés, tels que de l'acétone et du trichloréthylène et dérivés, pouvant noircir le matériau. Il est interdit d'utiliser des sources d'air chaud pour sécher le dispositif. Désinfecter la surface de l'appareil avec des produits neutres au moins une fois par semaine.

LIMPIEZA

Pasar por la superficie del dispositivo un paño húmedo embebido en jabón líquido neutro, como un detergente para vajillas. Prohibido utilizar detergentes líquidos abrasivos, con cloro, ácidos o bases fuertes, solventes concentrados, como acetona y tricloroetileno o derivados que puedan quitar brillo al material. Prohibido utilizar fuentes de aire caliente para el secado. Desinfectar la superficie del dispositivo con productos neutros al menos una vez a la semana.

IT

EN

DE

FR

ES

MANUTENZIONE

Controllare almeno ogni 3 mesi la stabilità dei fissaggi. Se il dispositivo dovesse risultare instabile contattare un installatore di fiducia. Il dispositivo non ha regolazioni. Per eventuali danni si prevede la completa sostituzione.

MAINTENANCE

Check the stability of the fixing at least every 3 months. Should the device become unstable, contact the installer. The device has no adjustments. It shall be fully replaced in case of any damages

WARTUNG

Prüfen Sie alle 3 Monate die Stabilität der Wandbefestigung. Das Gerät, wenn es instabil erscheint, von einem qualifizierten Techniker kontrollieren lassen. Das Gerät besitzt keine Einstellungen. Bei eventuellen Schäden muss das ganze Produkt ausgetauscht werden

ENTRETIEN

Contrôler au moins tous les 3 mois la stabilité des fixations murales. En cas d'instabilité du dispositif, contacter un installateur certifié. Le dispositif ne dispose pas de réglages. En cas de dommages éventuels, il est nécessaire de remplacer totalement le dispositif

MANTENIMIENTO

Controlar al menos cada 3 meses la estabilidad de las fijaciones. Si el dispositivo resulta inestable, contactar con un instalador de confianza. El dispositivo no tiene regulaciones. En caso de daños, será necesaria la sustitución completa.

IT

EN

DE

FR

ES

CONDIZIONI D'UTILIZZO GENERICHE

Il dispositivo non risente della temperatura dell'ambiente e comunque NON deve essere installato in ambienti soggetti a temperature minore di 4 °C o maggiore di 40 °C . Non installare in saune.

CONDITIONS OF USE

The device is not affected by the room's temperature, though it must NOT be installed in environments subject to temperatures below 4°C or above 40°C. Do not install in saunas.

GEBRAUCHSBEDINGUNGEN

Das Gerät ist unempfindlich gegenüber der Raumtemperatur, darf jedoch NICHT in Räumen verwendet werden, in denen Temperaturen unter 4 °C und über 40 °C herrschen. Nicht für Saunen geeignet.

CONDITIONS D'UTILISATION

Le dispositif n'est pas sensible à la température de l'environnement ; toutefois, celui-ci NE doit PAS être installé dans des environnements sujets à des températures inférieures à 4° C ou supérieures à 40° C. Ne pas installer dans un sauna.

CONDICIONES DE USO

El dispositivo resiste cualquier temperatura ambiente dentro de los límites de 4 °C y 40 °C. No instalarlo en saunas.

IT

EN

DE

FR

ES

SMALTIMENTO

Lo smaltimento è a cura dell'utilizzatore che deve effettuarlo secondo le leggi del paese nel quale il dispositivo è

DISPOSAL

The user is responsible for the device's disposal, which must occur in accordance with the laws of the country in which the device

ENTSORGUNG

Die Entsorgung ist gemäß den Vorschriften des Landes durchzuführen. Der Benutzer hat Sorge zu tragen

ÉLIMINATION

L'élimination du dispositif est à la charge de l'utilisateur qui doit l'effectuer selon les lois du pays d'installation du dispositif. Les

ELIMINACIÓN

Desechar el dispositivo de conformidad con las leyes del país de instalación. Los dispositivos no están hechos de

installato.

Il dispositivo non è fabbricato con sostanze dannose o pericolose per la salute e per l'ambiente e tutte le parti che lo compongono sono riciclabili e/o riutilizzabili.

Per la salvaguardia dell'ambiente per la sua fabbricazione sono stati utilizzati anche materiali con percentuali di riciclato.

Tenere l'imballo lontano dalla portata dei bambini; rischio di soffocamento.

is installed. The device is not manufactured using substances that are hazardous to human health and the environment, and all parts comprising it are recyclable and/or reusable. In order to safeguard the environment, the device also contains a certain amount of recycled materials.

Keep away from children packaging; risk of suffocation.

dass das verwendete Produkt nach Beendigung der Nutzung selbst zu entsorgen.

Unsere Produkte enthalten keine schädlichen oder gefährlichen Substanzen für die Gesundheit und die Umwelt und sind in allen Teilen recycelbar und/oder wiederverwertbar. Zum Schutz der Umwelt wurden bei der Herstellung auch Materialien mit einem Anteil an Recyclingmaterial verwendet.

dispositifs ne sont pas fabriqués avec des substances nocives ou dangereuses pour la santé et pour l'environnement, et toutes les parties qui le composent sont recyclables et/ou réutilisables. Pour la protection de l'environnement, le dispositif est fabriqué à base de matériaux partiellement ou totalement recyclables.

Tenir l'emballage à l'écart des enfants ; risque de étouffement.

sustancias nocivas o peligrosas para la salud y el medio ambiente, y todas las partes que lo componen son reciclables y/o reutilizables. Para la fabricación se han utilizado materiales con cierto porcentaje de reciclado, en defensa del medio ambiente. Mantener alejado de los niños de embalaje; riesgo de asfixia.


IT

EN

DE

FR

ES

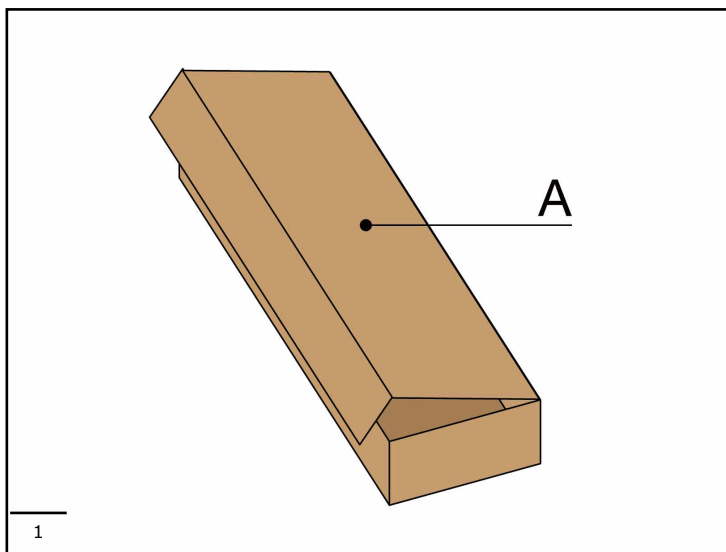

IT

Tipologia di imballaggio: Scatola

Codifica: PAP 20 - Cartone ondulato

Indicazioni per la raccolta: CARTA

EN

Packaging type: Box

Code: PAP 20 - Corrugated cardboard

Collection guideline: PAPER

DE

Verpackungsart: Box

Kodierung: PAP 20 - Wellpappe

Sammlungshinweise: PAPER

FR

Type d'emballage : Boîte

Codification : PAP 20 - Carton ondulé

Instructions de collecte : PAPIER

ES

Tipo de embalaje: Caja

Codificación: PAP 20 - Cartón ondulado

Instrucciones de recogida: PAPEL

IT**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per ulteriori informazioni visitare il sito internet - www.olympiaceramica.it - o contattare il nostro rivenditore di zona.

EN**FURTHER INFORMATION**

For further information, please visit our website or contact the our dealer zone

DE**WEITERE AUSKÜNFTE**

Für weitere Auskünfte, besuchen sie unsere Website oder setzen sie sich mit ihrem lokalen Händler Verkäufer in Verbindung

FR**INFORMATION COMPLÉMENTAIRE**

Pour toute information complémentaire, veuillez visiter le site ou bien contacter notre concessionnaire de zone

ES**PARA MÁS INFORMACIÓN**

para más informacion visite nuestro sitio o contacte nuestro distribuidor local

IT**NOTE**

Olympia si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti o alle loro specifiche senza l'approvazione preventiva o la comunicazione al cliente per:

- Modifiche necessarie per motivi di sicurezza,
- Cambiamenti che non influenzano negativamente le prestazioni del prodotto,
- Modifiche necessarie per soddisfare le specifiche del prodotto,
- Modifiche necessarie per soddisfare i requisiti di legge e dei regolamenti applicabili

EN**NOTE**

Olympia reserves the right to make changes to the products or to their specifications without prior approval or notification to the customer for:

- Changes required for safety purposes,
- Changes that do not adversely affect the product performance,
- Changes needed to meet the product specifications,
- Changes needed to comply with legal requirements or applicable regulations

DE**NOTE**

Olympia behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten oder ihren Spezifikationen ohne vorherige Genehmigung oder Benachrichtigung an den Kunden vorzunehmen:

- Änderungen, die für Sicherheitszwecke erforderlich sind,
- Änderungen, die die Produktleistung nicht beeinträchtigen,
- Änderungen, die erforderlich sind, um die Produktspezifikationen zu erfüllen,
- Änderungen, die erforderlich sind, um gesetzlichen Vorschriften oder anwendbaren Vorschriften einzuhalten

FR**NOTE**

Olympia se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits ou à leurs spécifications sans l'approbation préalable ou la notification au client pour:

- Les changements nécessaires à des fins de sécurité,
- Les modifications qui ne nuisent pas à la performance du produit,
- Les changements nécessaires pour répondre aux spécifications du produit,
- Les changements nécessaires pour se conformer aux exigences légales ou réglementaires applicables

ES**NOTAS**

Olympia se reserva el derecho a realizar cambios en los productos o en sus especificaciones sin previa aprobación o notificación al cliente por:

- Cambios necesarios por razones de seguridad,
- Cambios que no afecten negativamente a las prestaciones del producto,
- Cambios necesarios para cumplir las especificaciones del producto,
- Cambios necesarios para cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos aplicables".

Olympia Ceramica srl
 Loc. Pantalone n° 35 01030 Corchiano
 (VT) - Italy
 Tel. +39 0761 57 33 92
www.olympiaceramica.it