









NADAL® Virus-Probenentnahme- und Transportkit

Die NADAL® Abstrichtupfer mit Viralen Transportmedien (VTM) bieten eine Komplettlösung speziell für die Entnahme, den Transport und die Konservierung von viralen Proben wie beispielsweise von SARS-CoV-2, Inflenzaviren (Vogelgrippe, saisonale Grippe) oder Picornaviren (HFMD).

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten durch effektive Antibiotikum-Antimykotikum-Kombination
- ✓ Selbststehendes, für Zentrifugation geeignetes Transportröhrchen
- ✓ Ausreichend Transportflüssigkeit (3 mL) ermöglicht mehrere Testungen

Probennahme und -transport

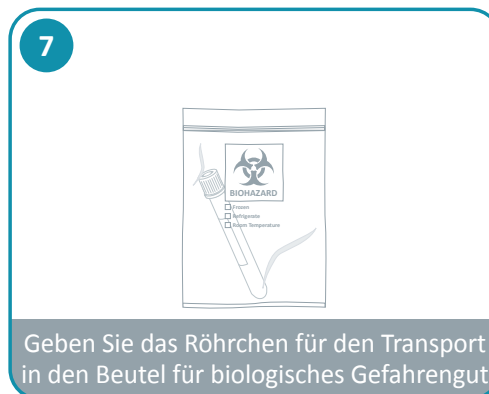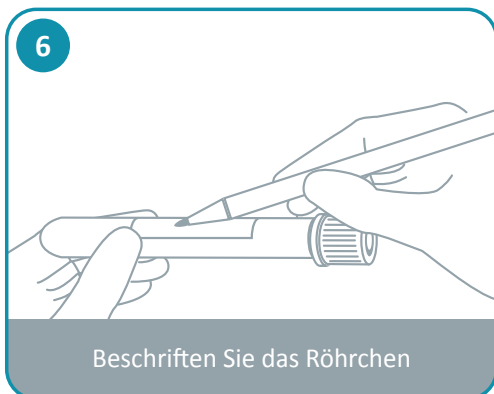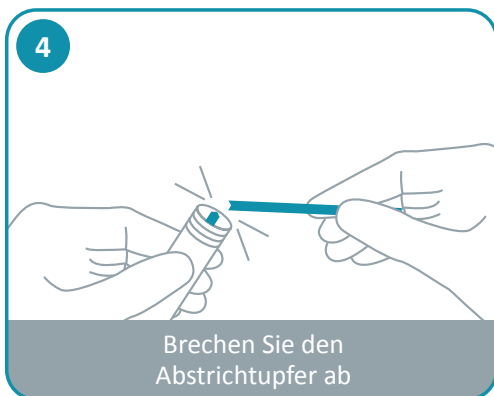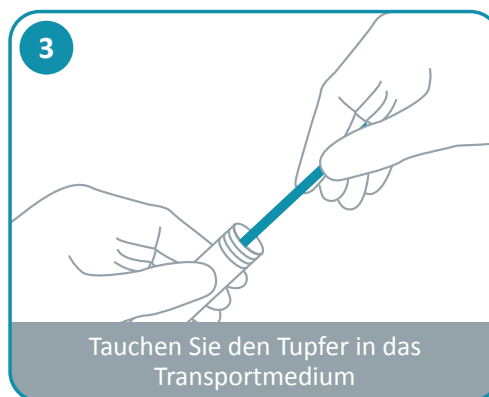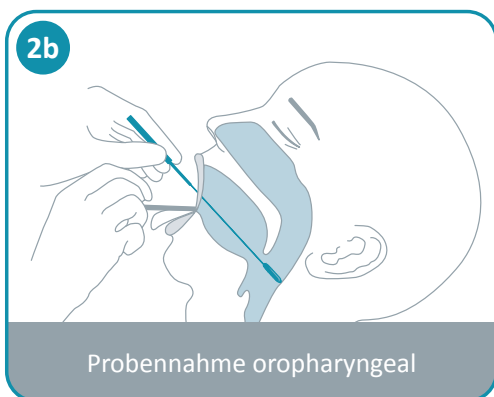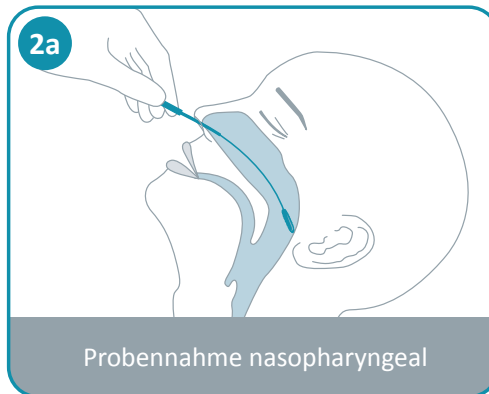

Eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

NADAL® VTM Probenentnahme- und Transportkit

- Pufferlösung osmotisch ausgewogen
- Virusprobe bleibt aktiv
- Virale Nukleinsäuren bleiben intakt


Tupfer-Typ	Medium	Anwendung	Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Packungsgröße
Beflockt Nylon	3 mL VTM	Naso- oder oropharyngeal	<ul style="list-style-type: none"> - Transportröhrchen mit 3 mL VTM - Steriler, beflockter Nylon-Tupfer mit Sollbruchstelle - Transportbeutel für biologisches Gefahrgut - Hanks'-HEPES-Pufferlösung mit BSA, Gelatine, Glukose, Penicillin-Streptomycin, Amphotericin B und Phenolrot 	85610	50 St.

NADAL® I-VM Probenentnahme- und Transportkit

- Denaturierung von Proteinen durch Guanidinsalze
- Inaktivierung der Virusprobe
- Virale Nukleinsäuren bleiben intakt

Tupfer-Typ	Medium	Anwendung	Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Packungsgröße
Beflockt Nylon	3 mL I-VM	Naso- oder oropharyngeal	<ul style="list-style-type: none"> - Transportröhrchen mit 3 mL I-VM - Steriler, beflockter Nylon-Tupfer mit Sollbruchstelle - Transportbeutel für biologisches Gefahrgut - Tris-HCl Puffer mit NaCl, EDTA und Guanidinsalzen 	85611	50 St.

Originalgröße

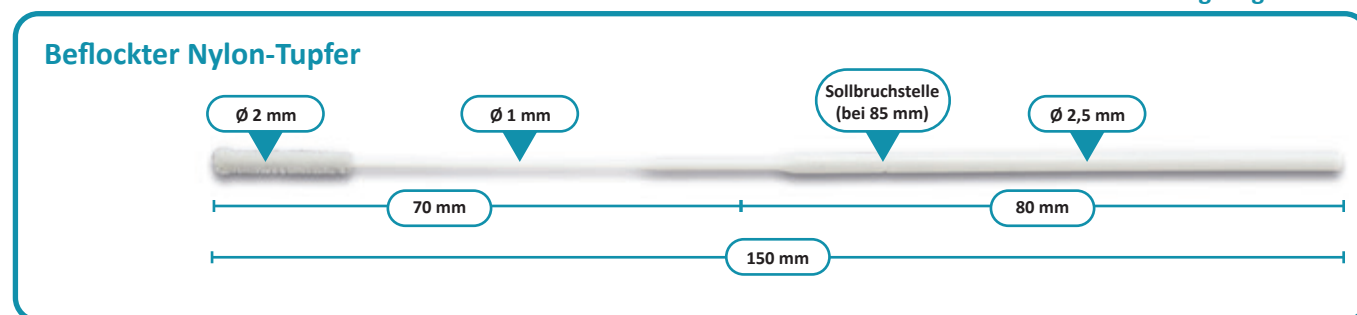

Der Aufbau und die Form des Tupfers sind wichtig, da diese die Menge der gewonnenen Probe beeinflussen.

Beflockter Nylon-Tupfer:

Material:

- ✓ vollsynthetische Kunstfaser mit hervorragenden Freisetzungseigenschaften
- ✓ frei von natürlichen Fettsäuren o.ä., die Transport und / oder Analyse der Probe beeinträchtigen.

Typ: Beflockt

- ✓ An beflockte Tupfer werden viele kurze einzelne Fasern angebracht, die so eine samtartige Tupferspitze formen.
- ✓ Sammel- und Freigabeeigenschaften beflockter Tupfer sind derzeit unübertroffen. Das gesammelte Probenmaterial kann nahezu vollständig für die weitere Analyse extrahiert werden.



Germany

Moers (Headquarters)

Carl-Zeiss-Strasse 12, 47445 Moers
Tel.:+49 2841 99 820-0
Fax:+49 2841 99 820-1



Regensburg (Headquarters)

Friedenstrasse 32, 93053 Regensburg
Tel.:+49 941 290 10-0
Fax:+49 941 290 10-50

Rosdorf

Raseweg 4, 37124 Rosdorf
Tel.:+49 551 270 706-0
Fax:+49 551 270 706-50



Belgique / België

Français:

Numéro gratuit: 0800 718 82
Fax gratuit: 0800 747 07
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Nederlands:

Gratis Tel: 0800 780 85
Fax: +31 70 3030 775
verkoop.dept@nal-vonminden.nl
www.nal-vonminden.nl



Česká republika

Bezplatný tel.: 800 143 685
Bezplatný fax: 800 143 686
czech@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.cz

Danmark

Gratis nummer: 808 887 53
Fax: +31 7030 30775
denmark@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.dk

Deutschland

Gratis-Tel.: 0800 589 2022
Gratis-Fax: 0800 589 2023
vertrieb@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

España

Tel. gratuito: 900 938 315
Tel. directo: +49 941 290 10-759
ventas@nal-vonminden.es
www.nal-vonminden.es

France

Numéro vert: 0800 915 240
Fax gratuit: 0800 909 493
N° international: ..+49 941 290 10-739
Fax international: ...+49 941 290 10-50
dept.ventes@nal-vonminden.fr
www.nal-vonminden.fr

Ireland

Freephone: 1800 555 008
Freefax: 1800 555 080
sales-dept@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com

Italia

Numero verde: 800 789 129
Fax gratuito: 800 789 130
vendite.dipt@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.it

Latinoamérica

Tel. directo: +49 941 290 10-761
ventas.latam@nvm-diagnostics.com
www.nal-vonminden.es

Luxembourg

Numéro gratuit: 800 211 16
Fax gratuit: 800 261 79
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Nederland

Gratis Tel: 0800 022 2890
Gratis Fax: 0800 024 95 19
verkoop.dept@nal-vonminden.nl
www.nal-vonminden.nl

Norge

Free phone: 800 16 731
norway@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com/no

Österreich

Gratis Tel: 0800 291 565
Gratis Fax: 0800 298 197
vertrieb.abt@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

Polska

Bezpłatny tel.: 00800 4911595
Bezpłatny fax: 00800 4911594
sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl
www.nal-vonminden.pl

Portugal

Tel. gratuito: 800 849 230
Tel. direto: +49 941 290 10-735
vendas@nal-vonminden.pt
www.nal-vonminden.pt

Schweiz / Suisse / Svizzera

Deutsch:

Gratis-Tel.: 0800 832 164
Gratis-Fax: 0800 837 476
info@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

Français:

Numéro gratuit: 0800 564 720
Fax gratuit: 0800 837 476
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Italiano:

Numero verde: 0800 832 2146
Fax gratuito: 0800 837 476
vendite.dipt@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.it

Suomi

Ilmainen Puh: 0800 918 263
myynti@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com/fi

Sverige

Gratis Tel.: 020 790 906
sweden@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.se

United Kingdom

Freephone: 0808 234 1237
Direct dial: +44 1580 23 22 88
sales-dept@nal-vonminden.co.uk
www.nal-vonminden.com

