


# Leaseir MHR

## DIDO DE ALTA POTÊNCIA



Leaseir

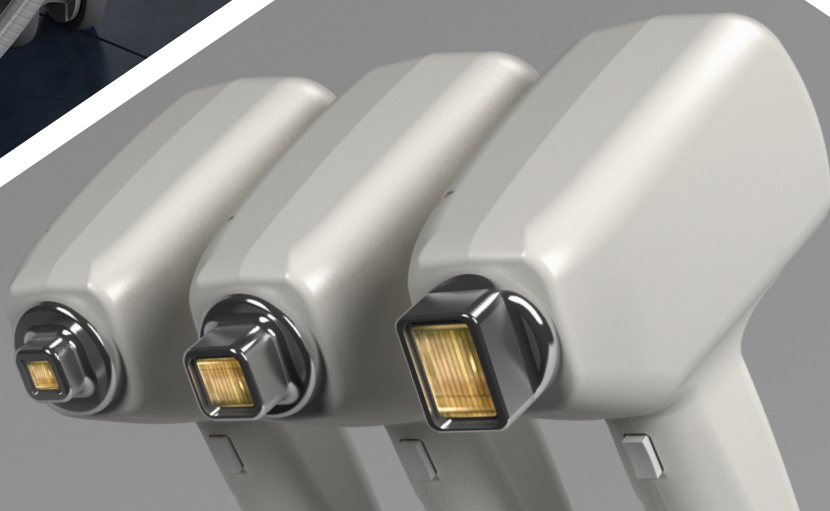

Leaseir

[www.leaseir.com](http://www.leaseir.com)

Single  
810nm

Dual  
810nm

Quad  
810nm

# Tecnologia



**LASER DE DIODO DE ALTA POTÊNCIA**



**CAPAZ DE ATUAR EM 4HZ COM ENERGIA MÁXIMA**

Até 40 J / cm<sup>2</sup> nos modos automático, 30ms, 100ms e 400 ms



**PEÇA DE MÃO SUBSTITUÍDA PELO USUÁRIO**

Facilita a manutenção e a alteração do tamanho do spot.  
Disponível em 810nm, 755nm e 1060nm




**SISTEMA FRIO**

Frio contínuo próximo a 0 ° C na ponteira que atua como anestésico.  
Sistema de refrigeração interno que permite trabalhar com uma temperatura confortável na sala



**Para todos os tipos de pele**

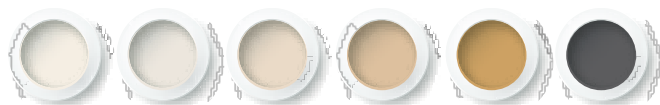





# Alta produtividade

## 4Hz



**O equipamento mais potente  
do mercado, capaz de fornecer  
40 J / cm<sup>2</sup> a 4 hz em 30 ms**

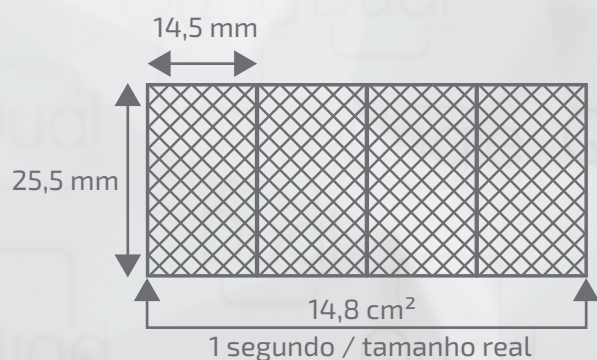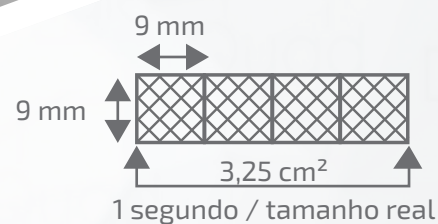

Leaseir MHR oferece conforto ao usuário graças a um design prático, baseado principalmente na ergonomia da pistola e no pedal de operação, o que proporciona simplicidade e facilidade de uso.

Leaseir MHR pode tratar grandes superfícies do corpo a 4Hz, mantendo a temperatura da ponteira próxima a 0 ° C, com fluência e modos recomendados nos estudos clínicos originais.

Através do processo de fototermólise seletiva, a destruição específica da estrutura celular é alcançada devido ao aumento térmico induzido pelo laser de diodo.

### ☺ Tempo estimado de tratamento nas pernas (5000 cm<sup>2</sup>)



|                    | Single               | Dual              | Quad                |
|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Spot               | 0,81 cm <sup>2</sup> | 2 cm <sup>2</sup> | 3,7 cm <sup>2</sup> |
| Cm <sup>2</sup> /s | 3,24                 | 8                 | 14,8                |
| Duração (s)        | 1.543                | 625               | 338                 |
| Duração (min)      | 26                   | 10                | 6                   |
| Tratamento total   | 30-35 min            | 15-20 min         | 10-15 min           |

# Interface intuitiva


## Aumente sua capacidade de trabalho

O Leaseir MHR otimiza a maneira como o usuário trabalha sob uma nova interface mais intuitiva.

Permite a visualização de todos os parâmetros selecionados em uma sessão em uma única tela.

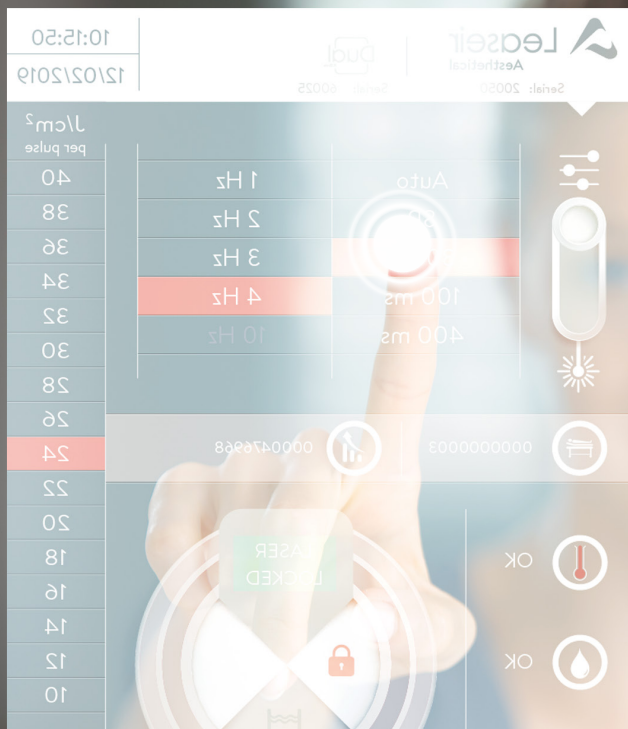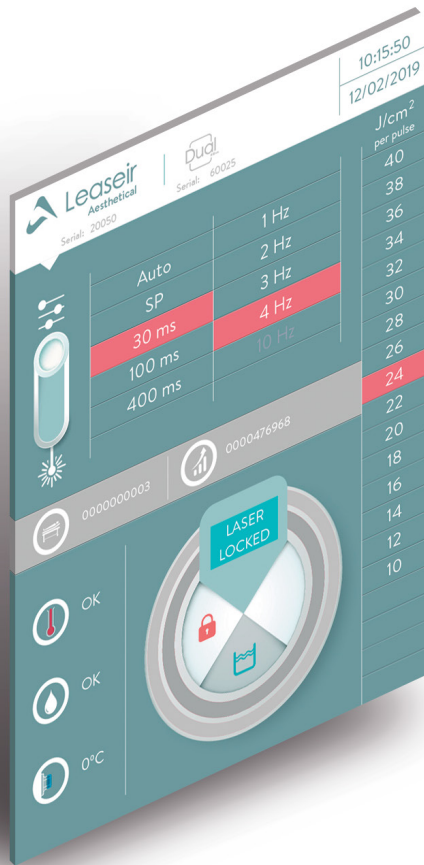


Tela sensível ao toque de 15" com tecnologia resistiva de fio LED.  
Incorpora tratamento anti-reflexo.  
Toque no sistema mesmo com luvas.

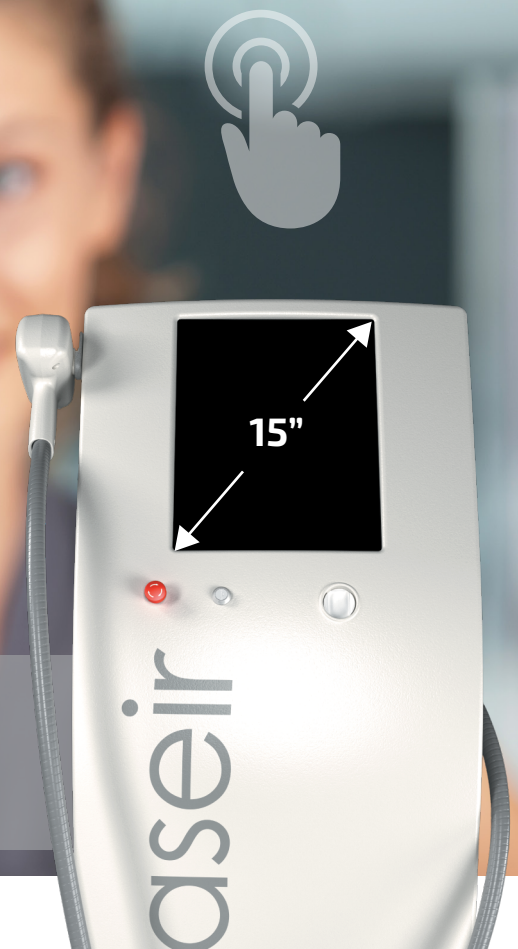



# Experiências

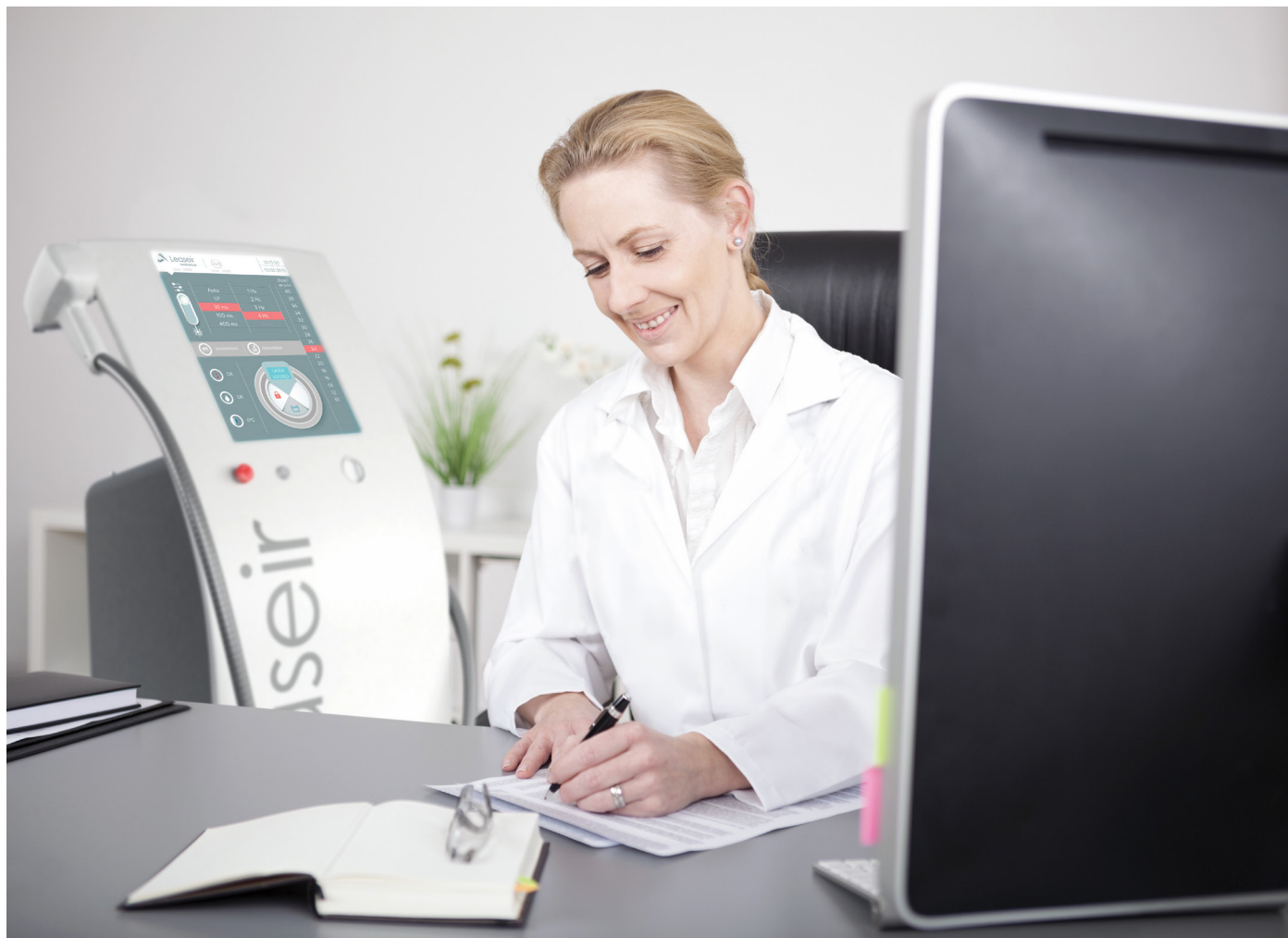

Com Leaseir MHR, os tratamentos são rápidos, indolores e eficazes, para que o profissional alcance os resultados desejados e a satisfação de seus clientes.

“ Na Clínica Calatayud, decidimos adquirir o equipamento Leaseir Single e foi um sucesso, pois os resultados estão sendo extraordinários. Single é uma equipe que reúne todos os recursos que procurávamos para oferecer a nossos clientes o melhor sistema de depilação: velocidade, potência, segurança e, o mais importante: resultados.


Graças ao seu poderoso sistema de resfriamento, a sensação de desconforto é muito menor do que outros sistemas que tentamos, bem como seus modos de trabalho que permitem uma depilação segura e eficaz de acordo com o diagnóstico do cliente. ”

Rafael Calatayud  
Gerente clínico de Calatayud

# Resultados comprovados

## Redução eficaz do pelo para todos os tipos de pele e ao longo do ano

Com Leaseir MHR, os resultados são obtidos a partir da primeira sessão. Leaseir MHR é projetado a primeira sessão. Leaseir MHR é projetado para depilar todos os tipos de pele em qualquer época do ano. Além disso, sua ponteira laser com temperatura contínua próxima a 0°C atua como anestésico.

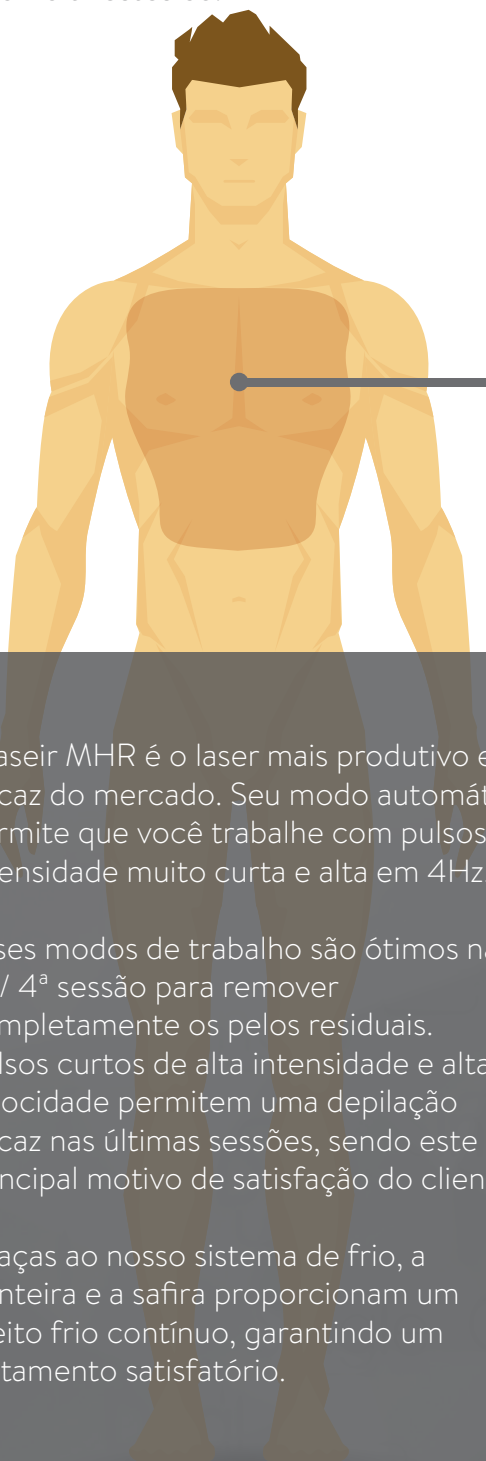


Leaseir MHR é o laser mais produtivo e eficaz do mercado. Seu modo automático permite que você trabalhe com pulsos de intensidade muito curta e alta em 4Hz.

Esses modos de trabalho são ótimos na 3ª / 4ª sessão para remover completamente os pelos residuais. Pulsos curtos de alta intensidade e alta velocidade permitem uma depilação eficaz nas últimas sessões, sendo este o principal motivo de satisfação do cliente.

Graças ao nosso sistema de frio, a ponteira e a safira proporcionam um efeito frio contínuo, garantindo um tratamento satisfatório.

Antes da primeira sessão - tipo IV

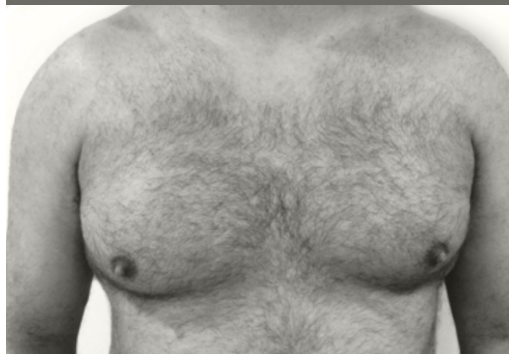

Após a primeira sessão



Após a segunda sessão



Após a terceira sessão





# Características

## EQUIPE

TEMPERATURA DO PONTO

0° a 3°C

EQUIPE CONSOLE

Altura 110 cm x Largura 45 cm x Profundidade 57 cm

PESO

50,5 Kg.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

15°-25°C / 59-77 F / 0-90% Umidade / 54-101.3 KPa

CLASSIFICAÇÃO LASER LÁSER

4 de acordo com EN60825-1

## DADOS DO LASER

Single

Dual

Quad

TAXA DE REPETIÇÃO

1 a 4 Hz e 10 Hz no modo SP

TAMANHO DO SPOT

9 X 9 mm

13,5 X 15 mm

14,5 X 25,5 mm

COMPRIMENTO DE ONDA

810 nm

FLUÊNCIA

40 J/cm², 30 ms

30 J/cm², 30 ms

DURAÇÃO DO PULSO

de 1 a 400 ms

de 2 a 400 ms

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS


Protegemos o diodo com contrato de manutenção

Sem consumíveis, sem ponteiras, sem fibras, sem gás criogênico

Serviço técnico próprio

Projetado e fabricado na Espanha

# A TECNOLOGIA DE DIODO A LASER MAIS AVANÇADA E MÁXIMA

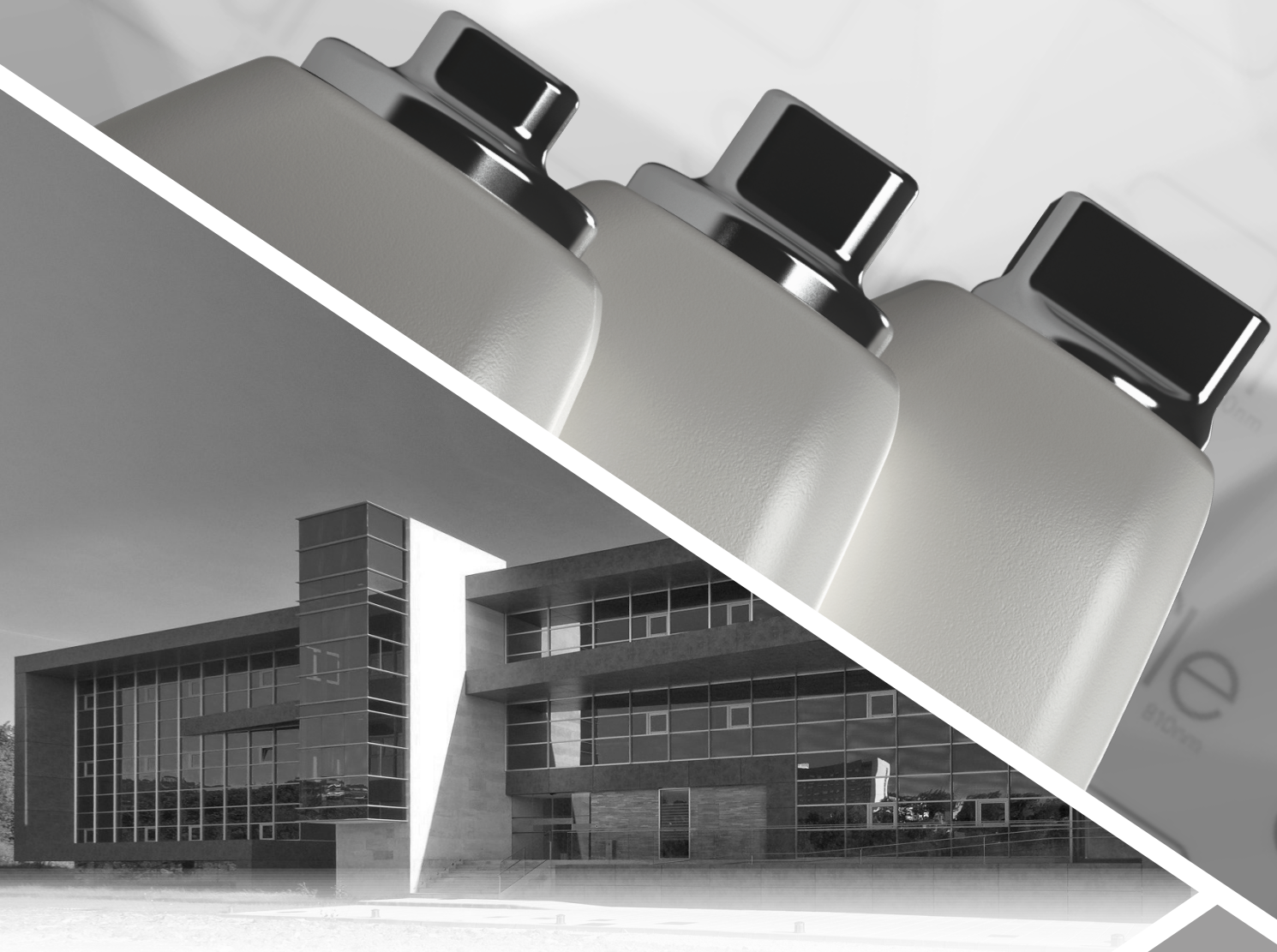

Os profissionais que integram a Leaseir Medical Light trabalham na vanguarda da tecnologia de laser de diodo há mais de 18 anos. Estamos comprometidos com as necessidades dos profissionais e garantimos os resultados que seus clientes exigem.

**Nosso principal objetivo é a qualidade, para que nossas equipes tenham os padrões exigidos para o equipamento em sua categoria**



## Leaseir

### DADOS DE CONTATO

#### OFICINA CENTRAL

Edificio Asturias  
Parque Científico y Tecnológico  
C/ Jimena Fernandez de la Vega, 140  
33203 Gijón (Asturias) - SPAIN  
+34 984 390 934  
[info@leaseir.com](mailto:info@leaseir.com)