Cabine de Segurança Biológica CIIB2

SIGMA

100% de ar exaurido para o exterior do laboratório através de tubulação



Grau de proteção:











Ar ambiente P ro dut o Usuário L abo ratór io

Tóxicos ou radioativos

Risco Biológico

Suas características construtivas seguem referências normativas da ABNT NBR-5382,NBR-5413 e NSF-49 - 2016.

Algumas aplicações

Permite manipulação de pequenas quantidades de substâncias químicas voláteis em conjunto com a manipulação de agentes de risco biológico moderado. Além disso, é apropriado para manipulação de citostáticos (antineoplásicos ou citotóxicos), material genético, hormônios e antibióticos.

Construída em chapa de alumínio com pintura eletrostática. Sua área de trabalho é construída totalmente em aço inox 304 com acabamento escovado, inclusive seu assoalho de trabalho.



Usuário/Operador★ Poucas amostras


★ Amostras razoáveis↓ Amostras consideráveis

🌣 Muitas amostras


		Dimensões internas [mm]			Dimensões externas [mm]				Quantidade		
MODELO	Li	Pi	Ai	Le	Pe	Ae	Altura com base		omadas auxiliares	Valvulas de gás	Opera do r(es) indi ca dos
GRAN 1000	570	310	435	705	545	1115	1915	300	2	1	1 *
GRAN 2000	725	485	575	860	745	1470	2270	450	2	1	! **
GRAN 3000	880	485	575	1015	745	1470	2270	450	2	1	! **
GRAN 4000	1185	485	575	1340	745	1470	2270	450	2	2	1 * ★ ou 11 *
GRAN 5000	1490	485	575	1665	745	1470	2270	450	2	2	!! **
GRAN 6000	1795	485	575	1990	745	1470	2270	450	2	2	11 🔆

Para maiores informações consulte nosso site ou entre em contato com nossa equipe de vendas.

Para dimensões especiais, consulte nosso setor de engenharia para adequação do seu projeto.

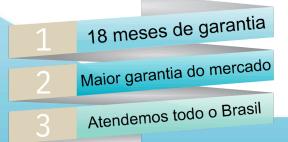



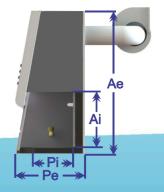

Itens de série:

- Pré-filtroclasse G4 de acordo com a ABNT NBR16101:2012;
- Filtros HEPA H14 (99,995% de retenção de partículas até 0,3 mícron metro de diâmetro), conforme norma EN1822 com vedação em borracha, com testes de integridade estanqueidade em 100% do lote;
- Válvula de gás tipo agulha com pintura epóxi branca, volante conforme norma DIN 12920. Pressão máxima de trabalho 2 bar conforme norma DIN12918 parte 2; Vidro com abertura
- 🔴 tipo guilhotina que permite ao usuário a para do mesmo em qualquer posição;
- Sensor de segurança que desliga a lâmpada germicida ultravioleta ao abrir o vidro, evitando o contato do usuário; Sensor audiovisual de limite de altura ideal de trabalho;
- Lâmpada germicida ultravioleta tubular;
- Lâmpada LED tubular com iluminação maior que 480 Lux conforme norma NBR 15767-2009 e NBR 5382; Tomada auxiliar padrão brasileiro conforme NBR14136 de 10A
- Motoventilador centrífugo com ajuste de velocidade eletrônico
- conforme saturação do filtro. Balanceado dinâmica e estaticamente de acordo com a norma ISO 1940 parte 1; Motoventilador secundário dedicado à exaustão:
- Duto flexível:
- Base com rodízio giratórios e freios;
- Esquema elétrico detalhado;
- Manual de instruções em português-BR;

Acessórios (Não inclusos):

- Manômetro diferencial de pressão
- Contador de horas para lâmpada germicida ultravioleta
- Timer para lâmpada germicida ultravioleta Sistema audiovisual para saturação do filtro Tela touch-screen (com as 4 funções anteriores integradas)
- Certificado de conformidade e integridade do ar
- Furação naparedeparapassagem do duto

Manutenção simplificada

Dimensões compactas

Inclinação de 10 graus

Baixo ruído e vibração

Fácil mobilidade. instalação e operação Filtros com rastreabilidade e certificado de qualidade

Matéria prima com certificado de qualidade Baixíssimo consumo de energia

Motor com ajuste eletrônico de velocidade (de 20 a 100%) que permite aumento gradual conforme saturação do filtro

Assoalho de trabalho removível em aço inox AISI 304 com acabamento escovado, leve e de fácil limpeza

Informações importantes

As Cabines de Segurança Biológicas (CSB) modelo SIGMA GRANSAFE são dotadas de um conjunto de filtros com fluxo de ar filtrado

verticalmente para a área de manipulação. Possui um motoventilador dedicado exclusivamente à exaustão de 100% do ar, que é conectado a um duto com saída para área externa do prédio. O motoventilador possui ajuste com inversor de frequência e é dimensionado para tubulação de no máximo 5 metros de comprimento e 2 curvas 90°


Para condições especiais consulte nossa

equipe de engenharia. O vidro frontal oferece proteção ao usuário contra os raios ultravioletas emanados

pela lâmpada germicida. É possível realizar manipulações ISO Classe 5 de acordo com a ISO 14644-1 (antiga Classe 100 de acordo com a Federal Standard 209 e.



Proteções elétricas Equipamento protegido contra descargas elétricas e oscilações de energia por fusíveis. A alimentação padrão de fábrica é de 220V monofásico padrão brasileiro. Para outro tipo, consulte-nos.

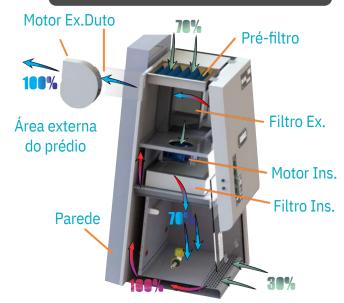

Lege nd a:

- Ar do ambiente
- Ar contaminado
- Ar filtrado

