


Estação Asséptica de Trabalho Não Ventilada

Câmara asséptica

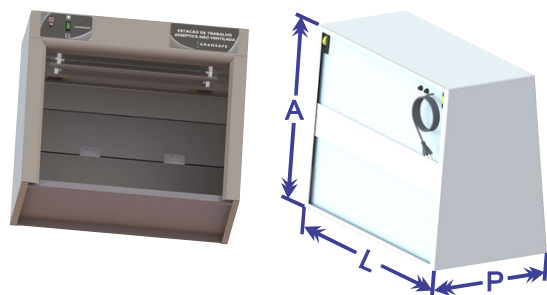

A = 610 mm; L = 645 mm; P = 415 mm

Para dimensões especiais, consulte nosso setor de engenharia para adequação do seu projeto.

Dimensões compactas

Manutenção simplificada

Baixíssimo consumo de energia

Inclinação de 10 graus, facilitando visibilidade

Matéria prima com certificado de qualidade

Proteções elétricas

Equipamento protegido contra descargas elétricas e oscilações de energia por fusíveis. A alimentação padrão de fábrica é de 220V monofásico padrão brasileiro. Para outras tensões, consulte nos

1

18 meses de garantia

2

Maior garantia do mercado

3

Atendemos todo o Brasil

Grau de proteção:



Ar ambiente
Laboratório



Produto*



Usuário



Tóxicos ou
radioativos



Risco
Biológico

Equipamento adequado as normas de segurança internacionais.

*Protege o produto apenas contra a contaminação cruzada

Algumas aplicações

A estação asséptica de trabalho não ventilada foi desenvolvida especialmente para manipulações de bacteriologia e outros onde o ambiente asséptico seja imprescindível. A esterilização fica por conta dos raios UV emanados pelas duas lâmpadas germicidas ultravioletas que, ao atingir o núcleo celular (ácidos nucleicos DNA e RNA) reagem fotoquimicamente acessando sua proliferação.

Construída em chapa de alumínio com pintura eletrostática.

Área de manipulação construída totalmente em aço inox AISI 304 com acabamento escovado.

- Possuem duas possibilidades de lateral da área de trabalho:

- Chapa de alumínio com pintura eletrostática;
- Vidro temperado incolor, possibilitando maior visibilidade;



- Duas opções para painel de comando:

● Analógico

● Touch-screen



Acionamento através de Interruptor 3 posições



Tela sensível ao toque de 3,2 polegadas

Itens de série:

- Lâmpada germicida ultravioleta tubular; Lâmpada LED tubular
- com iluminação maior que 480 Lux conforme norma NBR 15767-2009 e NBR 5382;
- Interruptor 3 posições para funcionamento das lâmpadas;
- Pés de borracha para nivelamento em bancada;
- Tomada auxiliar padrão brasileiro conforme NBR14136 de 10A;
- Vidro com abertura tipo guilhotina que permite ao usuário a limpeza do mesmo em qualquer posição; Manual de instruções em português-BR; Esquema elétrico detalhado;

