

4.0

CREDITO D'IMPOSTA  
20%

# SI STE MA X



**LA TECNOMEDICA®**

**PRESSY® STATION® PESOFARMA®**

**INNOVAZIONI IN FARMACIA DAL 1958**

# 4.0

## TRANSIZIONE 4.0

CREDITO  
D'IMPOSTA  
**20%**

*Le apparecchiature interconnesse al sistema della farmacia possono beneficiare del credito d'imposta detraendolo nel modello F24 dagli importi dovuti per imposte, contributi ecc.*

*La detrazione va effettuata in tre rate di cui la prima dopo che è avvenuta l'interconnessione e le due seguenti a distanza di un anno l'una dall'altra.*

## ANCHE IN LEASING

**TUTTI I PRODOTTI\* SONO ACQUISTABILI  
TRAMITE NOLEGGIO OPERATIVO O FINANZIARIO\*\***

*\* con valore maggiore di 2.000 euro (IVA esclusa)  
\*\* salvo approvazione di finanziaria e concessionaria*

# IL MISURATORE DELLA PRESSIONE

**PRESSY X**  
MADE IN ITALY



### **PRESSY X il misuratore più preciso mai realizzato!**

*Con l'ausilio dell'IA abbiamo creato un misuratore che realizza la sinergia delle due tecniche di misurazione universalmente impiegate: tecnica auscultatoria e tecnica oscillometrica.*

*Nella stessa misurazione due catene indipendenti tra di loro determinano due serie di risultati che vengono confrontati reciprocamente mediante un algoritmo che utilizza criteri di comparazione basati sull'analisi dinamica degli impulsi rilevati per determinare il valore pressorio più preciso.*

### **PRESSY X il misuratore automatico più ergonomico mai realizzato!**

*Nessun cavo e nessun tubo! Il dispositivo si adatta alla postura del soggetto senza mai costringerlo a posizioni obbligate. In tal modo si consegue una posizione naturale che favorisce il rilassamento richiesto per una misurazione ottimale.*

### **PRESSY X il più piccolo misuratore completamente automatico mai realizzato!**

*A differenza della totalità dei misuratori elettronici che hanno la chiusura della fascia del bracciale manuale con un velcro, Pressy X ha una fascia motorizzata che regola automaticamente la stretta in modo ottimale evitando applicazioni errate.*

con

**PRESSY X**  
MADE IN ITALY


il sistema BREVETTATO  
per la MISURAZIONE BILATERALE

il nuovo servizio della farmacia:

## IL TEST DELLA CIRCOLAZIONE

può dirci se le nostre arterie sono sane o se corriamo il rischio di sviluppare

la malattia vascolare periferica, dovuta a un restringimento o a un irrigidimento dei vasi sanguigni.

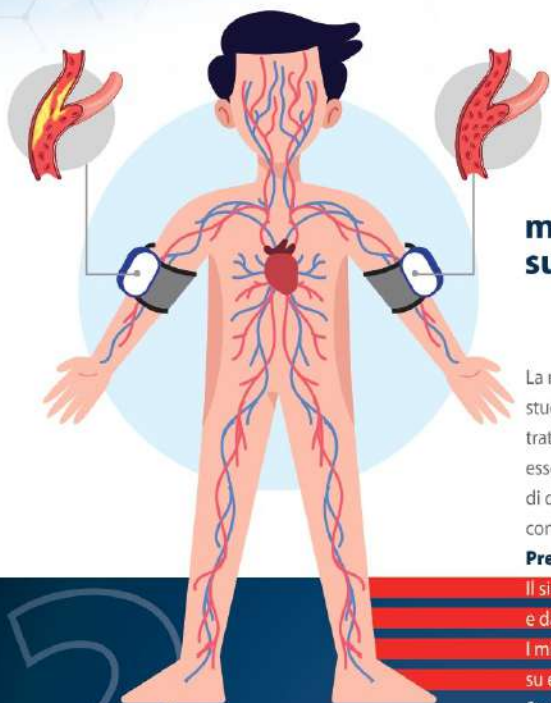

### misurare i valori su entrambe le braccia

La misura simultanea bilaterale è molto importante: recenti studi evidenziano che un divario >10 mmHg è stato riscontrato sul 4% della popolazione\*. Si tratta di un esame che per essere fatto a livello ambulatoriale richiederebbe l'intervento di due operatori addestrati per effettuare la misurazione contemporaneamente. Da qui il vantaggio che il sistema **Pressy X** offre con una soluzione comoda e a portata di tutti.

Il sistema è composto da due misuratori di pressione e da una stazione, tutti connessi tramite bluetooth.

I misuratori eseguono la rilevazione della pressione arteriosa su entrambe le braccia simultaneamente.

Secondo le indicazioni della dottrina medica\*\* nel caso in cui le due massime differiscono di oltre 10 mmHg è consigliabile accertare possibili problemi dell'apparato circolatorio.



**PRESSY X**  
MADE IN ITALY

\* UN DISLIVELLO TRA LE DUE MISURAZIONI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA È INDICE DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE.  
UNA RICERCA ABBASSA LO SCARTO TRA I VALORI ACCETTABILI

La pressione del sangue va misurata su ambedue le braccia. Perché l'eventuale differenza dei valori - segnalata dallo sfigmomanometro - può avere un importante significato. Se supera un certo livello, il rischio di avere un ictus o un infarto, è più elevato. Questi principi sono presenti nelle attuali linee guida. Ma - come si usa dire - «tizi la mano chi si è visto provare la pressione nelle due braccia durante una visita medica. È un evento piuttosto raro. Complice anche la fretta per i pazienti in attesa. «Ma un piccolo lasso di tempo in più può salvare delle vite», osservano i ricercatori dell'Università di Exeter (Gran Bretagna), che hanno condotto una vasta indagine al proposito. Lo loro è stata una meta-analisi, cioè una rivisitazione di studi precedenti, che ha messo insieme i dati di 24 ricerche globali condotte su adulti di Europa, Stati Uniti, Africa e Asia dei quali si conoscevano i valori della pressione nelle due braccia. Alla fine si è trattato di 54 mila persone. E il risultato finale è stato pubblicato sul giornale Hypertension.

#### I RISCHI NEL GIRO DI DIECI ANNI

L'indagine, rafforzando la raccomandazione a prendere la pressione nelle due braccia, arriva a stabilire un tetto più basso alle differenze ammissibili tra i due valori. Per avvalorare i propri dati, i ricercatori hanno contabilizzato il numero di morti, attacchi cardiaci, ictus verificatisi tra i soggetti sotto esame nel giro di dieci anni. I due valori della pressione da confrontare sono quelli della pressione sistolica (o massima), quella che se è oltre un certo livello dà luogo all'ipertensione. Ne soffre un terzo della popolazione adulta e da sola rappresenta la principale causa di infarti, ictus, morte prematura. Ora, perché è importante registrare la eventuale differenza tra la pressione sistolica di un braccio e dell'altro? Perché una significativa diversità potrebbe indicare un restringimento o un irrigidimento delle arterie, che influiscono sul flusso del sangue. Questi cambiamenti nei vasi sanguigni rappresentano un aumentato rischio di disturbi cardiovascolari, anche gravi. I ricercatori hanno concluso che ogni millimetro di mercurio (mmHg) in più trovato nel salto tra i due valori di pressione innalza dell'1 per cento (in dieci anni) il rischio di sviluppare un'angina, un infarto o un ictus.

#### DIVARIO MASSIMO DI 10 MILLIMETRI DI MERCURIO

Rispetto all'attuale tetto indicato come «pericoloso» dalle attuali linee guida, gli scienziati di Exeter propongono il limite di 10 mmHg come differenza tra le due braccia, in quanto già indicativa di un maggiore rischio cardiovascolare. Il che significa che molte più persone andrebbero prese in carico per una terapia. Si pensi che una disparità più alta di 10 mmHg nella pressione delle due braccia si trova nell'11 per cento delle persone con ipertensione e nel 4 per cento della popolazione generale.

Fondazione Umberto Veronesi pubblicato il 14-01-2021

## Check ritmo per la rilevazione di aritmie

Si tratta di una funzione indipendente dalla misurazione pressoria. Il sistema può registrare e stampare la pulsazione a pressione costante così da evidenziare eventuali anomalie del ritmo dovute a qualsiasi tipologia come ad esempio Fibrillazione atriale, Extrasistolia, ecc. ecc.

**FARMACIA DR. ROSSI**  
Via Emilia, 1 20100 - Milano  
Tel. 02 012 345 67

TRACCIATO RITMO



22/03/2024 09:04:32

Memorizza le tue misurazioni per farle consultare dal tuo medico. Chiedi al Farmacista.

Titolo di registrazione: 0.00euro

Esempio di ritmo regolare

**FARMACIA DR. ROSSI**  
Via Emilia, 1 20100 - Milano  
Tel. 02 012 345 67

TRACCIATO RITMO



22/03/2024 09:04:32

Memorizza le tue misurazioni per farle consultare dal tuo medico. Chiedi al Farmacista.

Titolo di registrazione: 0.00euro

Esempio di aritmia

# Cloud

Tutte le misurazioni  
sul **Cloud**



**Un vantaggio per il tuo cliente** che vedrà raccolte tutte le sue misurazioni senza limite di tempo e ovunque si trovi potrà consultarle.



**dati consultabili sempre**

ATTORE	GRU	CEI	DATA	ORA	VALORE	UNITA'	STATO
2000001	001	001	15/10/2018	10:00	110	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	11:00	112	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	12:00	115	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	13:00	118	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	14:00	120	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	15:00	122	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	16:00	125	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	17:00	128	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	18:00	130	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	19:00	132	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	20:00	135	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	21:00	138	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	22:00	140	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	23:00	142	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	00:00	145	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	01:00	148	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	02:00	150	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	03:00	152	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	04:00	155	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	05:00	158	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	06:00	160	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	07:00	162	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	08:00	165	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	09:00	168	kg	OK
2000001	001	001	15/10/2018	10:00	170	kg	OK

**Un grande vantaggio per il suo medico** che potrà accedere a tutti i dati quando gli sarà più comodo senza occupare la sala d'attesa con persone che vengono per aggiornarlo sulle loro misurazioni. Potrà quindi seguire meglio l'andamento della terapia e la compliance del paziente controllando l'effettuazione dei controlli pressori.

## LA BILANCIA

**NON SOLO  
UNA BELLISSIMA  
BILANCIA!**

**PESOFARMA X<sup>®</sup>**  
MADE IN ITALY  
**è multifunzione**



**Peso** con precisione di 50 g  
e Peso ideale



% **massa grassa**  
% **acqua corporea**



Memorizzazione sul **CLOUD**

**Collegamento con PRESSY X**  
per memorizzare anche le misurazioni pressorie



**Autodiagnosi**  
e aggiornamenti da remoto

**Scontrini**  
con intestazione personalizzabile

**FARMACIA DR. ROSSI**  
Via Emilia, 1 20100 - Milano  
tel. 02 012 345 67

**87,15Kg**  
**179cm**

**PESO IDEALE: 70Kg**

22/03/2024 09:04:32

Memorizza le tue misurazioni  
Chiedi al Farmacista.

Tariffa di registrazione: 0,00euro

**FARMACIA DR. ROSSI**  
Via Emilia, 1 20100 - Milano  
tel. 02 012 345 67

**87,15Kg**  
**179cm**

**PERCENTUALE DI MASSA GRASSA: 21%**

**PERCENTUALE ACQUA: 64%**

**PESO IDEALE: 70Kg**

22/03/2024 09:06:43

**Comunicazione servizi e prodotti**  
con il pannello LED programmabile



è dotata di un pannello LED che offre la possibilità di **COMUNICARE** in una veste originale

- ✓ **SERVIZI**
- ✓ **PRODOTTI**
- ✓ **INIZIATIVE PROMOZIONALI.**

Messaggi componibili con testi, immagini e video, **utilizzando con un pc il programma in dotazione**



# MODULARITÀ DEL SISTEMA

# X

Ti permette  
di **decidere**  
la tua **composizione**  
che puoi realizzare  
anche con successivi  
inserimenti



**A + B**

Permette di fare la **misurazione**  
ed **inviarla al Cloud**



**A + A + B**

In aggiunta a **A+B** permette di fare  
il **TEST della CIRCOLAZIONE**  
con la **misurazione bilaterale simultanea**



**A + C**

Permette di fare la **misurazione**  
ed **inviarla al Cloud** insieme  
ai **dati forniti dalla bilancia**



**A + A + C**

In aggiunta a **A+C** permette di fare  
il **TEST della CIRCOLAZIONE**  
con la **misurazione bilaterale simultanea**



## OPTIONAL MOTODESK

Il **tavolo motorizzato con statimetro**  
e **sedia abbinata** regola  
automaticamente la sua altezza  
in funzione della statura  
della persona seduta per evitare  
dislivelli tra il punto di misurazione  
e il cuore.





INNOVAZIONI IN FARMACIA DAL 1958

LA TECNOMEDICA S.r.l. - 27058 Voghera (PV) Italy - Via Arcalini, 16  
tel. +39 0383 365512 - fax +39 0383 365484 - vendite@latecnomedica.it

NUMERO VERDE  
**800-129667**

 3791 333 042

[www.latecnomedica.it](http://www.latecnomedica.it)